



Model PA2293



The HealthTeam Paraffin Heat System is designed to:

- Provide heat therapy to soothe the pain caused by arthritis, joint stiffness and muscle spasms.
- Condition and moisturize coarse, dry hands, feet and elbows.

IMPORTANT: Please read instructions before use

PA2293-INS-LAB-RevB08

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES – PLEASE READ BEFORE USE	3
HEALTHTEAM PARAFFIN HEAT SYSTEM OPERATION.....	6
FILLING THE PARAFFIN HEAT SYSTEM.....	6
HEATING SYSTEM OVERVIEW	7
USING THE PARAFFIN HEATING SYSTEM: FOR HANDS, FEET, OR ELBOWS	7
CLEANING THE UNIT AND REPLACING WAX	10
WARRANTY.....	11

GF, Graham-Field, and HealthTeam are registered trademarks of **GF Health Products, Inc.**

Packaging, warranties and products are subject to change without notice.
GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors.

**PA2293: HEALTHTEAM PARAFFIN HEAT SYSTEM
PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE**

Congratulations! You have just purchased a **HealthTeam Paraffin Heat System** from Graham-Field Health Products. Please read the following information carefully as it is designed to help provide optimum heat therapy.

IMPORTANT SAFETY GUIDELINES – PLEASE READ BEFORE USE

- ⚠ WARNING: Do not use this product without proper instruction from a Healthcare Professional.**
- ⚠ WARNING: Read and understand all instructions before using the HealthTeam Paraffin Heat System. Failure to use as instructed could result in personal injury and/or damage to the Paraffin Heat System.**

- ⚠ WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.**
- ⚠ WARNING: Always unplug the unit from the electrical outlet immediately after using.**
- ⚠ WARNING: Do not operate this product if it has a damaged cord or plug.**
- ⚠ WARNING: This device is equipped with a three-prong (grounding) plug for protection against possible shock hazard. Plug only into a properly grounded three-prong wall receptacle.**
- ⚠ WARNING: Always place this unit in a location where the electrical cord will not be stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Do not use this unit with an extension cord.**

- ⚠ WARNING: Do not use, store or place this unit where it could fall or be pulled into water.**
- ⚠ WARNING: If the unit accidentally falls into water or any liquid, DO NOT TOUCH; unplug immediately!**
- ⚠ WARNING: Use the HealthTeam Paraffin Heat System on a level surface.**
- ⚠ WARNING: Avoid applying hot paraffin wax near eyes, heat sensitive areas, or any open skin injury.**
- ⚠ WARNING: Allow the appliance to cool completely before handling, cleaning or storing.**
- ⚠ WARNING: Do not plug or unplug this appliance when hands or body are wet.**
- ⚠ WARNING: Do not heat paraffin wax in microwave, stove or using any method other than the HealthTeam Paraffin Heat System.**

HEALTHTEAM PARAFFIN HEAT SYSTEM OPERATION

Filling the Paraffin Heat System

1. Ensure that the unit is on a level, flat, sturdy, heat resistant surface.
2. Remove the lid and all plastic packaging inside the unit.
3. Open the one lb. paraffin wax pellets or blocks and place half of the contents in the unit. Add the remaining when these have melted. Do not overfill the unit. Do not fill the system past the maximum fill line indicated.
4. Plug the unit into a properly grounded, 120 volt, 60 cycle single phase power outlet. The red light will illuminate to indicate that power is being transferred to the unit and that the system is in the ON position.
5. Place the lid back onto the unit to retain heat.

6. It will take approximately 50 - 60 minutes to see the wax begin to melt. To melt six pounds of wax requires approximately 4 - 6 hours.

Heating System Overview

The illuminated light indicates the unit is on and operating. The heating element of this unit heats the paraffin wax to approximately 122 - 131 degrees Fahrenheit and will shut off automatically if the thermostat malfunctions.

Using the Paraffin Heating System: For Hands, Feet, or Elbows

1. Remove all jewelry. Wash and dry hands, feet or elbows thoroughly.
2. Remove lid from the unit. Test the temperature of the wax by lightly touching the melted wax with the inside of the wrist. DO NOT place any part of the body into the wax if the wax is too hot when tested on the inside of the wrist. If the temperature is too

hot, contact your Graham-Field equipment provider for assistance.


3. If the temperature of the wax was acceptable when tested on the inside of the wrist, place the desired hand, elbow or foot into the wax. For hands, start by opening the desired hand and spreading the fingers apart as shown in the picture at above right. Slowly immerse the hand, foot or elbow into the paraffin wax and then immediately remove it. Wait 3-5 seconds and re-dip. Waiting 3-5 seconds allows the paraffin wax to set. Repeat this process two or three times to create more wax layers. The paraffin usually takes 12 - 15 minutes to completely harden.



⚠ WARNING: Use with caution if skin is sensitive. Discontinue use immediately if any pain, irritation or discomfort is experienced.

Note: To retain heat, place the hand or foot which has been immersed in a plastic liner and cover with the bootie or mitt provided, shown at right, for fifteen minutes for longer to obtain the desired heat therapy.

4. After heat therapy is finished, peel the hardened wax from the hand, elbow or foot. For hand: begin with the wrist and work in a downward motion, removing all of the paraffin wax. Make sure that all of the wax is removed.
5. To maintain softness, massage oil or lotion of your choice onto the hands, elbows or feet.

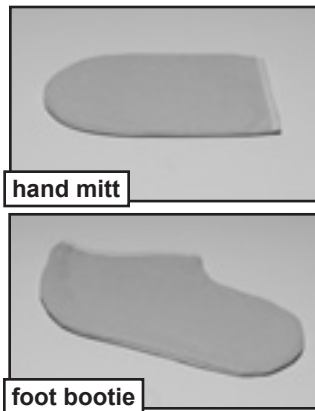

6. Discard the hard wax as it may contain cell build-up from the skin. DO NOT PUT PARAFFIN RESIDUE BACK INTO THE UNIT.

CLEANING THE UNIT AND REPLACING WAX

Clean the unit when the paraffin wax becomes dry or discolored, or when there is a build-up of skin on the bottom of the unit.

1. Unplug the unit. Allow the paraffin to solidify, which can take several hours.
2. After the paraffin is solid, plug the unit in for a few minutes to loosen the wax from the bottom and sides of the unit. Then unplug the unit.

⚠ WARNING: Do not leave the unit plugged in; it could get excessively hot and result in personal injury and/or damage to the unit.

3. Remove the paraffin and wipe the inside of the unit with a paper towel.

4. Make sure that the unit is unplugged and cool before cleaning. Clean the unit with an all-purpose cleaner (DO NOT USE CHLORINE OR BLEACH) and wipe dry.
5. The unit is then ready for new paraffin wax for next use. Store the Paraffin Heat System in a cool, dry place. *

** Paraffin wax beads available: Item # 2294 Wintergreen and Item # 2295 Unscented*

WARRANTY

GF Health Products, Inc. warrants the HealthTeam Model PA2293 Paraffin Heat System for a period of six months for defects in workmanship and materials. During the warranty period, defective items will be repaired or replaced at manufacturer's option at no charge.

USA, Corporate Headquarters:

**Graham-Field Health Products
2935 Northeast Parkway
Atlanta, Georgia 30360
tel: 800-347-5678, 770-447-1609
fax: 800-726-0601, 678-291-3232**



www.grahamfield.com

© 2008 GF Health Products, Inc.

PA2293-INS-LAB-RevB08

INSTRUCCIONES DE USO



HEALTHTEAM®

**Sistema de Parafina
Caliente de HealthTeam®**



El Sistema de Parafina Caliente de HealthTeam es diseñado para:

- Suministrar terapia caliente para aliviar el dolor causado por artritis, rigidez de las juntas y espasmo de los músculos.
- Acondicionar y hidratar las manos, los pies y los codos.

Por Favor de Leer las Instrucciones Antes de Uso

CONTENIDOS

DIRECTIVAS IMPORTANTE DE SEGURIDAD – LEA ANTES DE USO	3
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PARAFINA CALIENTE.....	6
LLENANDO EL SISTEMA DE PARAFINA.....	6
CALENTANDO EL SISTEMA	7
PARA LAS MANOS	7
PARA LOS PIES Y LOS CODOS	9
LIMPIANDO EL SISTEMA Y CAMBIANDO LA CERA.....	9
GARANTÍA.....	11

GF, Graham-Field y HealthTeam son marcas registradas de **GF Health Products, Inc.**

El envasado, garantías y productos son subjetivos a cambiar sin aviso. GF Health Products, Inc. no es responsable para errores tipográficos.

PA2293: SISTEMA DE PARAFINA CALIENTE DE HEALTHTEAM GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO EN EL FUTURO

Felicitaciones! Usted ha comprado un **Sistema de Parafina Caliente** de HealthTeam de Graham-Field Health Products. Por favor de leer las siguientes instrucciones cuidadosamente porque son diseñado a ayudar para suministrar terapia caliente óptimo.

DIRECTIVAS IMPORTANTE DE SEGURIDAD – LEA ANTES DE USO

- ⚠ AVISO: No debe usar este producto sin instrucciones correctos de un Profesional de Cuido de Salud.**
- ⚠ AVISO: Lea y entienda todas las instrucciones antes de usar el Sistema de Parafina Caliente de HealthTeam. Fallo de usar como indicado puede resultar en lesión personal y/o daño al Sistema de Parafina Caliente.**

- ⚠ AVISO: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad de daño o lesión causado por instalación, ensambla o uso impropio de este producto.**
- ⚠ AVISO: Siempre debe desenchufar el sistema del toma eléctrico inmediatamente después de uso.**
- ⚠ AVISO: No debe operar este producto si tiene un cordón o enchufe dañado.**
- ⚠ AVISO: Este aparato es equipado con un enchufe de tres-puntas para protección contra calambre peligrosos. Enchufe solamente en un enchufe de pared correcto.**
- ⚠ AVISO: Pon el sistema donde el cordón eléctrico no puede ser pisado, tropezado en o subjetivo a daño y tensión. No debe usar este sistema con un cordón con extensión.**
- ⚠ AVISO: No use, guarde o ponga el sistema donde se puede caer en agua.**

- ⚠ AVISO: Si el sistema se cae en agua o cualquier liquido, NO LO TOQUES, Enchufe inmediatamente!**
- ⚠ AVISO: Use el Sistema de Parafina Caliente en un superficie nivel.**
- ⚠ AVISO: Evite aplicar la cera caliente de parafina cerca de sus ojos, en otras áreas sensitivas o donde tiene un lesión abierta en la piel.**
- ⚠ AVISO: Permite que el sistema se enfríe completamente antes de limpiar o guardarlo.**
- ⚠ AVISO: No debe enchufar o desenchufar el sistema cuando tiene las manos o el cuerpo mojado.**
- ⚠ AVISO: No debe calentar la cera de parafina en el microonda, la estufa, o cualquier otro método aparte del Sistema de Parafina Caliente de HealthTeam.**

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PARAFINA CALIENTE

Llenando el Sistema de Parafina

1. Asegure que el sistema está en un superficie nivel y resistente al calor.
2. Retire la tapa y todo el embalaje plástico adentro del sistema.
3. Abre la bolsa de 1 libra de cera y utilice la mitad de los contenidos en el sistema. Añade lo restante después cuando ha derretido.
4. Enchufe el sistema en el enchufe de pared correcto de 120 voltio, fase de 60 ciclos; la luz se iluminara.
5. Ponga la tapa en el sistema para retener calor.
6. Va tomar aproximadamente 50-60 minutos para que la cera empieza a derretir. Para derretir seis libras de cera requerirá aproximadamente 4-6 horas.

Calentando el Sistema

La luz iluminada indica que el sistema está prendido y funciona. El elemento que calienta el sistema calienta la cera a aproximadamente 122 - 131 grados de Fahrenheit y se apaga solo automáticamente si el termostato no funciona.

Para Las Manos

1. Retire su joyería. Lave y seque sus manos completamente.
2. Retire la tapa del sistema y cuidadosamente pruebe la temperatura de la cera usando la parte de adentro de su muñeca.
3. Abra su mano y extienda sus dedos y sumergirá su mano lentamente en la cera de parafina (como se enseña en la foto a la derecha).



Con cuidado, **inmediatamente** retire su mano. Esto permite que la parafina se queda en su mano. Repite este proceso tres o cuatro veces para crear más capas de cera. La parafina usualmente toma 12-15 minutos para ponerse duro completamente.

⚠ AVISO: Usa con precaución si la piel es sensitiva. Interrumpir el uso inmediatamente si experiencia dolor, irritación o incomodidad.

Nota: Para retener el calor, cubre su mano con una funda de plástico y cubre la mano con el manopla de mano proveído por 15 minutos para prolongar la terapia con calor (o Para los Pies: El calcetín enseñado en la bajo derecha).



4. Cuando has terminado la terapia de cera de parafina, pele la cera duro de sus manos. Empiece con la muñeca y hacia bajo quitando todo la cera de parafina.
5. Para mantener suavidad, utilice aceite o cualquier loción en sus manos.
6. Se recomienda que descarte la cera duro porque puede contener célula de la piel. EVITE PONER RESIDUO DE LA PARAFINA EN EL SISTEMA.

Para Los Pies y Los Codos

Sigue las instrucciones delineadas arriba
PARA LAS MANOS.

LIMPIANDO EL SISTEMA Y CAMBIANDO LA CERA

Limpie el sistema cuando la cera está seca o descolorado o cuando hay un acumulación de célula de la piel en el fondo del sistema.



1. Desenchufe el sistema. Permite que la parafina se solidifica que puede tomar varias horas.
 2. Después que la parafina está seca, enchufe el sistema por unos minutos para aflojar la cera del fondo y los lados del sistema. Después desenchufe el sistema.
- ⚠ AVISO: No debe dejar el sistema enchufado; puede causar que el sistema se caliente excesivamente cual puede dañar el sistema.**
3. Retire la cera de parafina y limpie la parte de adentro con una toalla de papel.
 4. Asegure que el sistema está desenchufado y no está caliente antes de limpiar. Limpie el sistema con un limpiador común (NO DEBE USAR CLORO Y LEJIA) y sécalo.
 5. El sistema está listo para llevar nuevo cera de parafina para el próximo uso. *

* Cera de parafina disponible: Numero # 2294 Wintergreen & Numero # 2295 No Aromatizado

GARANTÍA

GF Health Products, Inc. garantiza el Sistema de Parafina Caliente Modelo numero PA2293 para un periodo de seis meses por defectos en habilidad y materiales. Durante el periodo de garantía, artículos defectivos pueden ser arreglados y cambiadas por el fabricante a no precio.

USA, Jefaturas Corporativas :

**Graham-Field Health Products
2935 Northeast Parkway
Atlanta, Georgia 30360
tel: 800-347-5678, 770-447-1609
fax: 800-726-0601, 678-291-3232**



www.grahamfield.com

© 2008 GF Health Products, Inc.

PA2293-INS-LAB-RevB08