

Info: The most current version of these instructions can be found online at www.grahamfield.com

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: PLEASE READ

- ⚠ **WARNING:** Important! Read and understand these instructions before assembling or using the Bath Seat. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the Bath Seat is not properly assembled and adjusted, personal injury and damage to the Bath Seat could result.
- ⚠ **WARNING:** If components are damaged or missing, contact your Graham-Field distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the Bath Seat.
- ⚠ **WARNING:** GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.

INTENDED USE

The Bath Seat is intended for use by individuals who require seating support while bathing or showering. It is designed to be placed fully inside the bathtub or shower.

Contraindications

- ⚠ **WARNING:** This product has a maximum weight capacity of 350 lb, **EVENLY DISTRIBUTED**.
- WARNING:** **DO NOT** use this product as a transfer bench or climbing device.
- WARNING:** Use this product only with tub floors wider than 18 3/4".

ASSEMBLY

Remove the Bath Seat from the box and place it on a flat, dry surface.

Attaching the Legs:

1. Locate the seat frame (see figure 1); place it upside down on a flat, dry surface.
2. Locate the legs (see figure 2).
3. Attach the legs to the seat frame (see figure 3). Depress the locking button at the top of each leg and slide it into the seat frame until the button protrudes from the hole.
4. Repeat step 3 for each leg.

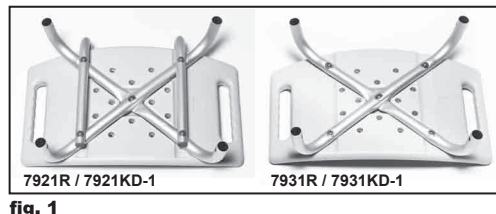


fig. 1



fig. 2



fig. 3

- ⚠ **WARNING:** Ensure legs are securely installed and all hardware is tight before proceeding.

Attaching the Backrest: (Model 7921R and 7921KD Series Only)

1. Locate the backrest (see figure 4).
2. Attach the backrest to the seat frame (see figure 5). Depress the locking buttons and slide the backrest onto the seat frame until the buttons protrude from the holes.

- ⚠ **WARNING:** Ensure backrest is securely installed and all hardware is tight before proceeding.



fig. 4



fig. 5

All Models

- ⚠ **WARNING:** Ensure that the Bath Seat is assembled as described. If the Bath Seat is not properly assembled and installed, personal injury and damage to the Bath Seat could result.

OPERATION

See assembled Bath Seat at right. Contact your GF distributor immediately if you see any issue with fit, form, function, or safety. For more information on GF Health Products, Inc. parts and services, please contact your GF distributor or www.grahamfield.com.

Adjusting Leg Height

Push in the adjustment button and move to the desired height position until it clicks into place. Ensure that legs are locked at the same height and all leg adjustment buttons protrude fully through adjustment holes.

⚠ **WARNING: Ensure all Bath Seat components are secure before each use.**

Center of Balance During Use

The point where the Bath Seat will tip forward, rearward or sideward is determined by its center of balance and stability, and the center of balance and stability is affected by the user's body position and weight distribution. If you fail to heed the following warnings, falling or tipping may occur and could cause severe personal injury.

⚠ **WARNING: To avoid falling or tipping:**

Have someone help you until you know the balance points of your Bath Seat and how to avoid tipping.

Do not put downward weight on one side or corner of the Bath Seat.

Do not put downward weight on the backrest.

Do not reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach.

Never try to reach an object if you must move forward in your seat and your buttocks do not stay in full contact with the seat.

Never lean backward to reach an object.

MAINTENANCE

⚠ **WARNING: Check the Bath Seat weekly for signs of damage or cracking. If damage or cracking of any component of the Bath Seat is found, DO NOT use the Bath Seat. Contact your Graham-Field distributor.**

Inspect the Bath Seat weekly and ensure all components are secure.

To clean the Bath Seat, wash it with soap and water or a mild detergent, then rinse. Ensure that the Bath Seat is rinsed well before use.

WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("Graham-Field") warrants the Lumex Model 7921R / 7921KD-1 / 7931R / 7931KD-1 Bath Seat as follows: Limited lifetime warranty against manufacturer's defects. If a product is deemed to be under warranty, GF Health Products, Inc. shall provide, at its option, (1) replacement of any defective part or product or (2) a credit of the original selling price made to GF Health Products, Inc.'s initial customer. The warranty does not include any labor charges incurred in replacement part(s) installation or any associated freight or shipping charges to GF Health Products, Inc.

The warranties contained herein contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, including the most current version of these instructions, please visit our website at www.grahamfield.com.

Graham-Field and Lumex are registered trademarks of GF Health Products, Inc.

© 2012 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Made in China



fig. 6

Nota: La más reciente versión de estas instrucciones podrá ser encontrado en www.grahamfield.com

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: POR FAVOR, LEA

- ⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar la Silla de Bañera. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud para dirección en el uso de este producto. Si la Silla de Bañera no está ensamblado e ajustado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor inmediatamente. **NO** substituya piezas. Utilice únicamente partes de reemplazo de Lumex. Partes de reemplazo que no son de Lumex podrían causar herida personal y daños a la Silla de Bañera.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

USO INTENCIONADO

La Silla de Bañera está diseñado para uso por las personas que necesitan apoyo para sentarse mientras se baña o se ducha. Está diseñado para ser colocado totalmente dentro de la bañera o ducha.

Contraindicaciones

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 350 lb, **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE**.
ADVERTENCIA: **NO** utilice este producto como banco de transferir o dispositivo de la escalada.
ADVERTENCIA: Use este producto solo con pisos de bañera mas anchos que 18 3/4".

MONTAJE

Quite la Silla de Bañera de la caja y colóquelo sobre una superficie plana y seca.

Sujetando las patas:

1. Localice el marco del asiento (véase la figura 1); colóquelo boca abajo sobre una superficie plana y seca.
2. Localice las patas (véase la figura 2).
3. Instale las patas en el marco del asiento (véase la figura 3).
Presione el botón de cerradura en la parte superior de cada pata e introdúzcala en el marco del asiento hasta que el botón sobresale por el hueco.
4. Repita el paso 3 para cada pata.

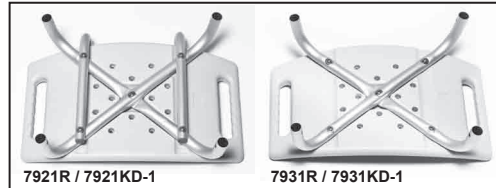


fig. 1



fig. 2



fig. 3

Sujetando el respaldo: (7921R y 7921KD-1 solamente)

1. Localice el respaldo (véase la figura 4).
 2. Instale el respaldo en el marco del asiento (véase la figura 5).
Presione los botones de cerradura y deslice el respaldo en el marco del asiento hasta que los botones sobresalen de los huecos.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el respaldo esté bien instalado y todo la ferretería esté apretado antes de continuar.



fig. 4



fig. 5

Todos los modelos

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la Silla de Bañera se monta tal como se describe. Si la Silla de Bañera no está ensamblado e instalado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.

OPERACIÓN

Véase la Silla de Bañera ensamblada a la derecha. Comuníquese con su distribuidor de GF inmediatamente si ve algún problema con el ajuste, forma, función, o la seguridad. Para obtener más información sobre GF Health Products, Inc. partes y servicios, por favor, contacte con su distribuidor o www.grahamfield.com.

Ajustando la Altura de las Patas

Presione el botón de ajuste y pase la pata a la posición deseada hasta que enganche en su lugar. Asegúrese de que las patas están cerradas a la misma altura y todos los botones de ajuste sobresalen completamente de los huecos de ajuste.

⚠ **ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los componentes de la Silla de Bañera estén bien instalados antes de cada uso.**

Centro de Gravedad Durante Uso

El punto en que la Silla de Bañera se incline hacia delante, hacia atrás o hacia un lado está determinada por su centro de equilibrio y estabilidad, y el centro de equilibrio y estabilidad se ve afectada por la posición del cuerpo del usuario y la distribución del peso. Si no obedece las siguientes advertencias, caerse o volcarse pueden ocurrir y pueden causar herida personal grave.

⚠ **ADVERTENCIA: Para evitar caerse o volcarse:**

Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su Silla de Bañera y la forma de evitar volcarse.

No ponga peso hacia abajo en un lado o en la esquina de la Silla de Bañera.

No ponga peso hacia abajo en el respaldo.

No se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance.

Nunca trate de alcanzar un objeto si tiene que seguir adelante en su silla y los glúteos no se quedan en pleno contacto con la silla.

Nunca se incline hacia atrás para llegar a un objeto.

MANTENIMIENTO

⚠ **ADVERTENCIA: Revise la Silla de Bañera cada semana para detectar signos de daños o grietas. Si se encuentra el daño o rotura de cualquiera de los componentes de la Silla de Bañera, NO use la Silla de Bañera. Comuníquese con su proveedor de Graham-Field.**

Inspeccione la Silla de Bañera semanalmente y asegúrese de que todos los componentes estén bien instalados.

Para limpiar la Silla de Bañera, lávela con agua y jabón o un detergente suave, luego enjuague. Asegúrese de que la Silla de Bañera está bien enjuagarse antes de usar.

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

GF Health Products, Inc. ("Graham-Field") garantiza la Lumex Silla de Bañera Modelo 7921R / 7921KD-1 / 7931R / 7931KD-1 de la siguiente manera: garantía limitada de por vida contra defectos de fabricación. Si un producto se considere bajo garantía, GF Health Products, Inc. proporcionará, a su opción, (1) sustitución de cualquier componente o producto defectuoso o (2) un crédito por el precio de venta original hecha al cliente inicial de GF Health Products, Inc. La garantía no incluye la mano de obra gastos generados por el componente de repuesto de instalación o de cualquier de flete o gastos de envío para productos a GF Health Products, Inc.

Las garantías que figuran en este documento contiene todas las declaraciones y garantías en relación con la materia objeto de este documento, y sustituyen todas las negociaciones previas, acuerdos y entendimientos con respecto a la misma. El receptor del presente documento reconoce y declara que no ha basado en ninguna declaración, afirmación, garantía, contrato de garantía u otra promesa, excepto los establecidos en este documento.



fig. 6



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos. Para obtener la información más actualizada y vigente relativa a los envases, garantías, productos y especificaciones, incluyendo la versión más actualizada de estas instrucciones, por favor visite nuestro sitio web en www.grahamfield.com.
Graham-Field y Lumex son marcas registradas de GF Health Products, Inc.

© 2012 GF Health Products, Inc. • 2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Fabricado en China