



HT9007, HT9008, HT9009, ENGLISH STYLE ICE CAP: INSTRUCTIONS FOR USE

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

Note: The most current version of these instructions can be found online at www.grahamfield.com.

- ⚠ **WARNING: Important! Read and understand these instructions before using the Lumex English Style Ice Cap. If you do not understand any part of these instructions, contact your medical supply distributor for direction in the use of this product.**
- ⚠ **WARNING: If components are damaged or missing, contact your dealer immediately. DO NOT use substitute parts.**
- ⚠ **WARNING: Notice for California Customers- California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.**
- ⚠ **WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.**

INSTRUCTIONS FOR USE

▲ **NOTICE: Do not put the ice cap in contact with sharp objects which could pierce the material and cause damage.**

Unscrew the top counter-clockwise to open. Carefully insert ice and water into opening. Ensure the ice is free from sharp edges which may puncture the bag and cause a leak. Screw the top clockwise to close. Ensure the top is securely closed.

INSTRUCTIONS FOR STORAGE

After use, dispose of contents and air dry. Store in a cool, dry place.

One-Year Limited Warranty

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the "Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the Lumex HT9007 / HT9008 / HT9009 English Style Ice Cap is warranted for one year. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component, in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

Obtaining Warranty Service

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling 678-291-3207, sending a fax request to 770-368-2386, or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.


Exclusions

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

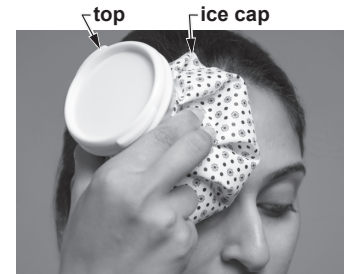

HT9007

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, including the most current version of these instructions, please visit our website at www.grahamfield.com.



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

Graham-Field and Lumex are registered trademarks of GF Health Products, Inc.



HT9007, HT9008, HT9009, BOLSA DE HIELO ESTILO INGLÉS: INSTRUCCIONES DE USO

POR FAVOR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Nota: La más reciente versión de estas instrucciones podrá ser encontrado en www.grahamfield.com.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Importante lea y entienda estas instrucciones antes de usar su Lumex Bolsa de Hielo Estilo Ingles. Si no entiende alguna de estas instrucciones, contacte su distribuidor de productos médicos para direcciones en el uso de este producto.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Si componentes están dañados o le faltan, contacte su distribuidor inmediatamente. No use piezas sustitutas.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Aviso para los clientes de California - Proposición 65 de California **ADVERTENCIA:** Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California por causar cáncer y daños reproductivos o del desarrollo.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o herida causada por ensamblaje o uso incorrecto de este producto.

INSTRUCCIONES DE USO

- ▲ **AVISO:** No ponga la bolsa de hielo en contacto con objetos punzantes que puedan perforar el material y causarle daño.

Destornille la tapa a la izquierda para abrir. Introduzca con cuidado el hielo y el agua en la bolsa de hielo. Asegúrese de que el hielo utilizado está libre de bordes afilados que puedan perforar la bolsa y causar una fuga. Atornille la tapa a la derecha para cerrar. Asegúrese de que la tapa esté bien cerrada.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Después de uso, disponga de los contenidos y aire seco. Conserve en un lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GF Health Products, Inc. ("GF") garantía al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto provído a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la Lumex Bolsa de Hielo Estilo Ingles tiene garantía de un año. El periodo de garantía se comencia en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debe llamar a GF directamente llamando 678-291-3207, mandando fax a 770-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre ni GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y 3) Cargos de labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZDE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. no es responsable de errores tipográficos. Para obtener la información más actualizada y vigente relativa a los envases, garantías, productos y especificaciones, incluyendo la versión más actualizada de estas instrucciones, por favor visite nuestro sitio web en www.grahamfield.com.



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

Graham-Field y Lumex son marcas registradas de GF Health Products, Inc.



HT9007