

Info: The most current version of these instructions can be found online at www.grahamfield.com.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION: PLEASE READ

- ⚠ **WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using the Shower Head. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the Shower Head is not properly assembled and installed, personal injury and damage to the Shower Head could result.**
- ⚠ **WARNING: If components are damaged or missing, contact your Graham-Field distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the Shower Head.**
- ⚠ **WARNING: Notice for California Customers- California Proposition 65 WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.**
- ⚠ **WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.**


CONTENTS

One 84" shower hose with nut on each end; one handheld shower head; three rubber washers; and one three-way diverter valve and mounting bracket.

INSTALLATION

▲ NOTICE: Do not over-tighten any items.

1. Remove all contents from packaging.
2. Remove the existing shower head, leaving the shower arm.
3. Screw the diverter valve short male end into the new shower head.
4. Place a rubber washer in the diverter valve female end, if not already installed.
5. Screw the diverter valve female end into the shower arm.
6. Place a rubber washer in the nut at one end of the shower hose.
7. Screw that shower hose nut into the diverter valve long male end.
8. Place a rubber washer in the remaining shower hose nut.
9. Screw that hose nut onto the shower head.

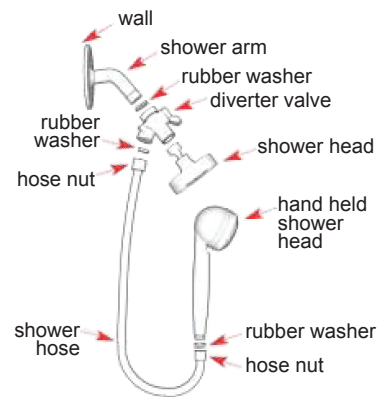

MAINTENANCE / CLEANING

To clean the shower head, wash it with soap and water or a mild detergent, then rinse with clear water.

▲ NOTICE: Never use abrasive cleaners or scouring pads on any part of the shower head.

LIMITED WARRANTY

The following warranty information is a SUMMARY of the complete Product Warranty provided by GF Health Products, Inc. For the complete warranty, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the "Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, this product is warranted for three (3) years. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling 678-291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: 1) Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; 2) Products not properly installed, used, or cleaned and maintained; and 3) Labor or shipping charges. Other exclusions apply.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

For the complete warranty for this product, please visit our website at www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. is not responsible for typographical errors. For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, including the most current version of these instructions, please visit our website at www.grahamfield.com.



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

Graham-Field and Lumex are registered trademarks of GF Health Products, Inc. © 2011 GF Health Products, Inc.

2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Made in China

Nota: La más reciente versión de estas instrucciones podrá ser encontrado en www.grahamfield.com.

IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: POR FAVOR, LEA

- ⚠ **ADVERTENCIA: ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar la Regadera. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud para dirección en el uso de este producto. Si la Regadera no está ensamblado e instalado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor inmediatamente. NO substituya piezas. Utilice únicamente partes de reemplazo de Lumex. Partes de reemplazo que no son de Lumex podrían causar herida personal y daños a la Regadera.**
- ⚠ **ADVERTENCIA: Aviso para los clientes de California - Proposición 65 de California**
ADVERTENCIA: Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California por causar cáncer y daños reproductivos o del desarrollo.
- ⚠ **ADVERTENCIA: GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.**

Contenido

Una manguera de ducha 80" con tuerca en los dos extremos; una regadera de mano; tres arandelas de goma; y una válvula desviadora de tres vías y soporte de montaje.

MONTAJE

▲ AVISO: No apriete demasiado cualquier artículo.

1. Desempaque todo el contenido del embalaje.
2. Retire la regadera existente, dejando el brazo de ducha.
3. Atornille el extremo macho y corto de la válvula desviadora en la regadera nueva.
4. Coloque una arandela de goma en el extremo hembra de la válvula desviadora, si no está ya instalado.
5. Atornille el extremo hembra de la válvula desviadora en el brazo de ducha.
6. Coloque una arandela de goma en la tuerca de un extremo de la manguera de ducha.
7. Atornille esa tuerca de manguera de ducha en el extremo macho y largo de la válvula desviadora.
8. Coloque una arandela de goma en la tuerca restante de la manguera de ducha.
9. Atornille esa tuerca de manguera en la regadera.



MANTENIMIENTO / LIMPIEZA

Para limpiar la regadera, use un jabón suave y agua, entonces enjuague con agua limpia.

▲ AVISO: NO utilice limpiadores abrasivos o estropajos en cualquier parte de la regadera.

GARANTÍA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del producto estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto provisto a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, este producto tiene garantía de tres (3) años El periodo de garantía se comenzará en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debe llamar a GF directamente llamando 678-291-3207, mandando fax a 770-368-2386 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones específicas se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre ni GF será responsable por lo siguiente: 1) Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; 2) Productos no instalados, utilizados o mantenidos correctamente; y 3) Cargos de labor o transporte. Otras exclusiones se aplican.

GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

Para la garantía completa por este producto, por favor de visitar a la página www.grahamfield.com.

GF Health Products, Inc. no es responsable por errores tipográficos. Para obtener la información más actualizada y vigente relativa a los envases, garantías, productos y especificaciones, incluyendo la versión más actualizada de estas instrucciones, por favor visite nuestro sitio web en www.grahamfield.com



GRAHAM-FIELD
www.grahamfield.com

Graham-Field y Lumex son marcas registradas de GF Health Products, Inc. © 2011 GF Health Products, Inc.

2935 Northeast Parkway, Atlanta, GA 30360 • tel 770-368-4700 • fax 770-368-2386 • Fabricado en China