

Bariatric Steel Crutches

Muletas de Acero Bariátricas

Items 3614A & 3615A



SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE


1. This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
2. This product has a maximum user weight limitation of 600 lb. - **EVENLY DISTRIBUTED.**
3. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
4. If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
5. Before use, ensure that crutch tips are not ripped, worn or missing, are properly seated and straight on each crutch.
6. Always use caution when using this product on wet or slippery surfaces. **DO NOT** use crutches on stairs or steep inclines.
7. Inspect crutches weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
8. Before use, ensure that push buttons protrude fully through adjustment holes.
9. Proper height adjustments must be made to both the leg extension and the crutch handle. A dealer or therapist should aid in the proper placement for maximum balance and support.
10. Wing nuts **MUST** be tight at all times.

GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.

GENERAL WARNING (CONT.)

- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

MAINTENANCE

- Wipe crutches weekly with a damp cloth.
- Grip and underarm pad may be cleaned with mild soap or detergent. **DO NOT** use organic solvents, such as acetone, which may damage grip.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check hardware and positioning weekly for tightness.
- Replace crutch tips as needed.
- To guarantee the best service from your crutches, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

ALUMINUM CRUTCHES SIZE

Selection Chart

Item Number	Size	User Height
3614A	Adult	5' 2" – 5' 10"
3615A	Tall	5' 10" – 6' 6"

ADJUSTING HANDLE POSITION

1. Remove the wing nut and bolt securing the handle to the crutch.
2. Align the handle with the desired set of adjustment holes.
3. Secure with wing nut and bolt.
4. Repeat for other crutch.

HEIGHT ADJUSTMENT

1. Use double push buttons in center tube to adjust height in 1" increments.

Caution: Be sure that push buttons are fully protruding through the same respective adjustment hole of each leg extension. This ensures that the adjustable legs are securely locked into position and an even height adjustment is obtained.

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the "Customer") only, that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for three (3) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE


This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling **(678) 291-3207**, sending a fax request to **(770) 368-2386** or by e-mailing a request to **cs@grahamfield.com**. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: **1)** Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; **2)** Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and **3)** Labor or shipping charges. Other exclusions apply. Additional limitations relative to this warranty may be found on www.grahamfield.com Terms and Conditions page. State laws governing the warranty of this product may provide more expanded rights than those set forth in this warranty.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

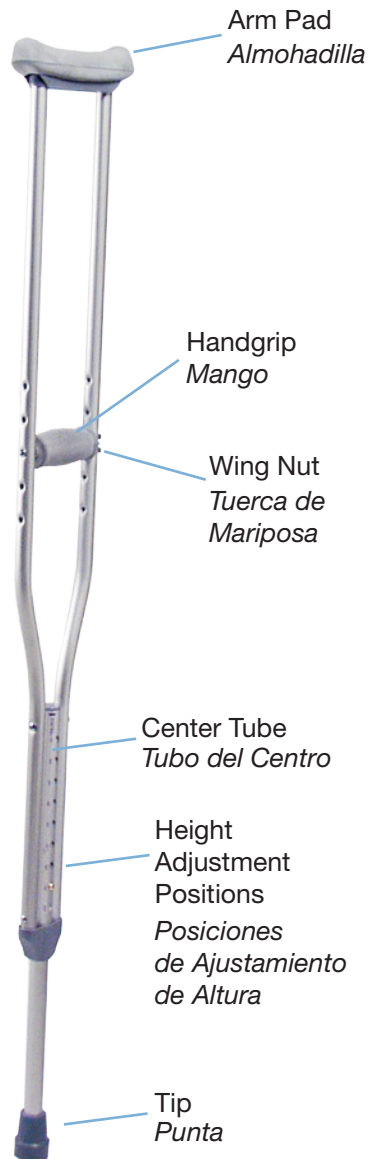

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Este producto no debe ser usado sin instrucciones apropiadas de su profesional de cuidado de salud.
2. Este producto tiene una capacidad de peso máximo de usuario de 600 lb. - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
3. GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
4. Si componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO debe usar partes substitutos.
5. Antes de uso, asegure que las puntas de la muleta están puesto correctamente por cada muleta.
6. Siempre utilice caución cuando usando estos productos en superficies mojados y resbalosos. NO debe usar muletas en escaleras o inclinaciones empanadas.
7. Examine las muletas seminales para función normal y gasto. Si algún componente no esta funcionando correctamente y se ve desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparar y partes de reemplazo.
8. Antes de uso, asegure que los botones sobresalen completamente por los huecos de ajustamiento.
9. Ajustamiento de altura apropiado debe ser por ambos patas de extensión y el mango de la muleta. Un distribuidor o terapeuta puede ayudarle en ajustamiento apropiado para soporte y balance máximo.
10. Tuercas de mariposas TIENEN que estar apretados todo el tiempo.

ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Se debe tener cuidado para asegurar que todos los ajustes de altura sean seguros..
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsabilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, asamblea o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en ua rutina de mantenimiento preventivo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente in la posicion abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es diseno para soportar todo el peso del usuario.

MANTENIMIENTO

- Para polvo, limpie el andador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas (si aplicable) por daño y desgaste periódicamente. Utilice un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca use solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en ninguna parte del producto.
- Examine su andador semanal para función y desgaste. Si algunos componentes so están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos están sueltos, **NO LOS** use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su andador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

TAMAÑOS DE MULETAS DE ALUMINIO

Tabla de Seleccionar

Item Number	Size	User Height
3614A	Adulto	5' 2" – 5' 10"
3615A	Alto	5' 10" – 6' 6"

AJUSTAMIENTO DE LA POSICION DEL MANGO

1. Remueve la tuerca de mariposa y tornillo que esta asegurando el mango a la muleta.
2. Aliñe el mango con los huecos de ajustamiento deseado.
3. Asegure la tuerca de mariposa y el tornillo.
4. Repite para la otra muleta.

AJUSTAMIENTO DE ALTURA

1. Usa los botones dobles en el tubo del centro para ajustar la altura in incrementos de 1".

Caución: Asegurase que los botones están sobresaliendo completamente por los mismos huecos de ajustamiento de cada extensión de pata. Esto asegurara que las patas están seguros en posición y que has obtenido un ajustamiento de altura uniforme.

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera is el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del product estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Producto pródigo a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por tres (3) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando **(770) 368-4700**, mandando fax a **(770)-368-2386** o por email a **cs@grahamfield.com**. Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: **1)** Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; **2)** Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y **3)** Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican. Limitaciones adicionales relativos a esta garantía pueden ser encontrados en www.grahamfield.com pagina de Acuerdos y Condiciones Leyes del Estado gobernando la garantía de este producto puede dar mas derechos que estan en esta garantía.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

Features

- Heavy duty steel construction supports larger user
- Reinforced center tube gives a stronger support to secure and maintain proper balance and stability
- Easy height and handle adjustment lets you adjust to best fit your needs
- Padded underarm pads and grips provide you with a comfortable and durable fit
- Maximum Weight Capacity 600 lb - EVENLY DISTRIBUTED

Características

- Construcción muy resistente soporte el usuario mas grande
- Tubo reforzado del centro provee un soporte mas fuerte para asegurar y mantener un balance apropiado y estabilidad
- Ajustamiento fácil de altura y mango permite que se ajuste para sus necesidades
- Almohadillas y mangos provee que es confortable y durable
- Capacidad de Peso Máximo 600 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2017, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com