

LUMEX[®]

by graham-field

UpRise Onyx Folding Walker

Andador Plegable UpRise Ónix

Item 700175C-2



graham
field

SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE


1. Each individual should **ALWAYS** consult with their physician or other health care professional to determine proper adjustment and usage.
2. Before use, be sure that the walker is in its open and locked position.
3. All legs **MUST** be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the walker is properly balanced.
4. This product has a maximum user weight limitation of 400 lbs - **EVENLY DISTRIBUTED. ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag.
5. Ensure handgrips **DO NOT** twist on walker – otherwise damage or injury may occur.
6. **ALWAYS** test to see that the walker and attachments are properly and securely locked in the open position **BEFORE** using.
7. After installation and before use, ensure that all attaching hardware is securely tightened.
8. **ALWAYS** use caution when using the walker on wet and slippery surfaces. **DO NOT** use the walker on stairs and steep inclines.
9. Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place feet securely on the floor. Use **EXTREME** caution when reaching for any object.
10. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
11. Inspect Walker weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.

GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.

GENERAL WARNING (CONT.)

- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure, and that wheels (if applicable) and moving objects are in good working order before using this walker.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov

INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

STABILITY WARNINGS

Be careful when reaching for objects when using the walker. Reaching for objects can change the weight distribution of the walker and may cause the walker to tip, resulting in injury or damage.

MAINTENANCE

- For dust and dirt, wipe walker gently with damp, soft cloth.
- Inspect wheels (if applicable) periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the walker.
- Inspect Walker weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrips are loose, **DO NOT** use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

ASSEMBLY OF THE WALKER

1. Remove closed walker from carton.
2. Install legs by depressing the height adjustment button and slide onto walker frame until the button engages in the desired adjustment hole. Adjust all leg attachments to the same height.

WARNING: Ensure all push buttons protrude fully from height -adjustment holes, all legs are adjusted to the same height, and wheeled leg attachments are positioned on the front and towards the outside of the walker.

3. To open walker, push handgrips and sides out away from each other until the release mechanisms lock into place.

CLOSING THE WALKER


1. Push downward on release button and hold.
2. Grab one handgrip and push inwards towards center of walker.
3. Repeat for other handgrip.

ADJUSTING THE HEIGHT

NOTE: Height adjustment should be made to desired height before operation. Consult with healthcare professional for proper adjustment.

1. To adjust the height of the leg attachment, depress the adjustment button and slide upwards or downwards to the desired height.
2. Adjust the height of the walker by aligning all four leg attachments to the same position height.

When walking, the user should grasp one handgrip in each hand, positioning body between the two rear walker legs, and walking at a comfortable pace. The rear walker legs should be in contact with the floor at all times.

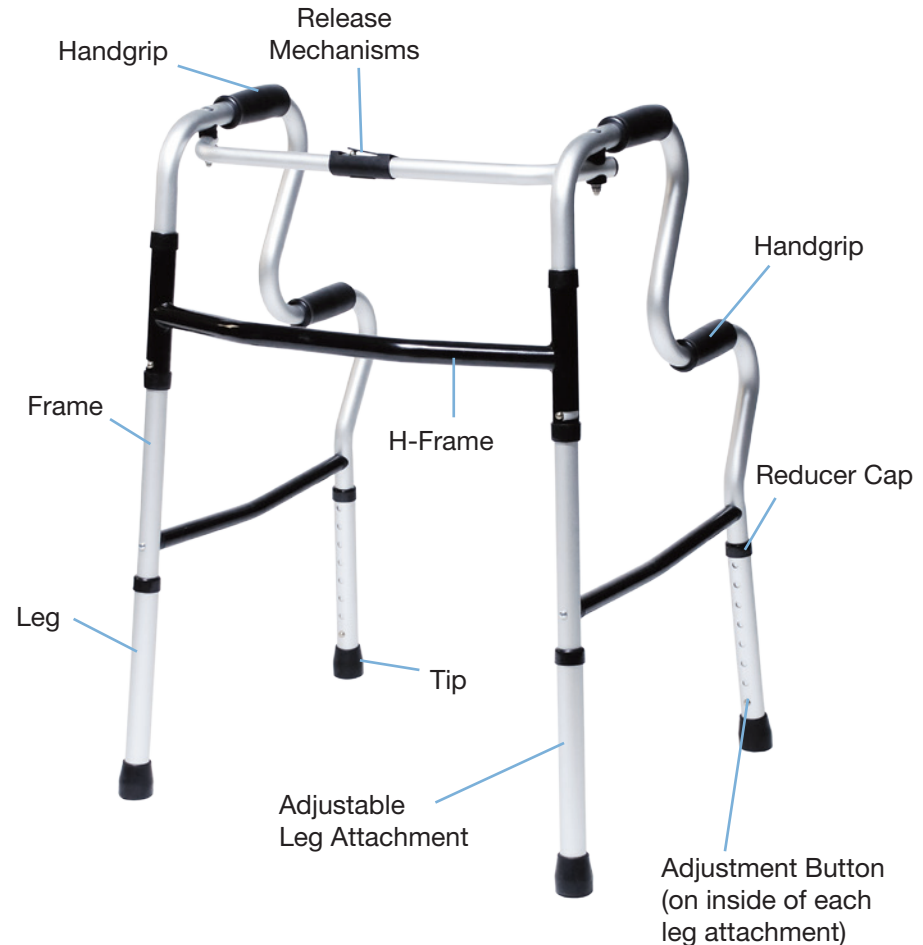

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants to the original retail purchaser or lessee (either is the “Customer”) only, that it will replace or repair components, at GF’s sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. The warranty is for parts only and does not include labor or costs of shipping. All warranties are conditioned upon the proper use of the product strictly in accordance with applicable GF instructions. Product provided to users as rentals must be serviced by the provider and inspected prior to delivery. Each user must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use. Within the guidelines set forth in this document, the frame is warranted for three (3) years and the normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips are warranted for three (3) months. The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of the warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

This limited warranty shall only apply to defects that are reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period. If there is not a Dealer, you must contact GF directly by calling **(678) 291-3207**, sending a fax request to **(770) 368-2386** or by e-mailing a request to **cs@grahamfield.com**. Specific directions will be provided by the Customer Service Representative.

EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following: **1)** Defects, damage, or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; **2)** Products not installed, used, or properly cleaned and maintained; and **3)** Labor or shipping charges. Other exclusions apply. Additional limitations relative to this warranty may be found on www.grahamfield.com Terms and Conditions page. State laws governing the warranty of this product may provide more expanded rights than those set forth in this warranty.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantía al comprador original o arrendatario (cual quiera is el “Cliente”) solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. La garantía es para partes solamente y no incluye fuerza laboral o el costo de transporte. Todas garantías con condicionales por el uso apropiado del product estrictamente en acuerdo con las instrucciones aplicables de GF. Product o provído a usuarios como réntales deben ser serviciados por el proveedor y inspeccionado antes de entrega. Cada usuario debe ser preparado en la operación y seguridad de este producto antes de uso. Dentro las reglas normales en este documento, la estructura tiene garantía por tres (3) anos y los componentes de uso normal como puntas, ruedas y manijas tienen garantía por tres (3) meses. El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTIA

La garantía limitada solamente aplica a defectos reportados al Distribuidor de quien el Cliente compro el producto dentro el periodo de garantía aplicable. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando **(770) 368-4700**, mandando fax a **(770)-368-2386** o por email a **cs@grahamfield.com**. Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes.

EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF será responsable por lo siguiente: **1)** Defectos, daño o otras condiciones causadas por mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidente, daño de transporte o falta de buscar y obtener reparo o repuesto en manera puntual; **2)** Productos no instalados, utilizados or mantenidos correctamente; y **3)** Cargos de Labor o transporte. Otras exclusiones se aplican. Limitaciones adicionales relativos a esta garantía pueden ser encontrados en www.grahamfield.com pagina de Acuerdos y Condiciones Leyes del Estado gobernando la garantía de este producto puede dar mas derechos que estan en esta garantía.

GARANTIA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DANOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTIA ES LA UNICA GARANTIA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTIAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS.

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Cada individual SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuidado de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
2. Antes de uso, asegure que el andador esta en su posición abierto y asegurado.
3. Todas las patas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el andador esta balanceado apropiadamente.
4. Este producto tiene una limitación de peso máximo de usuario de 400 lb- DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE. SIEMPRE tiene que observar la limitación de peso en el “hang tag”.
5. Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el andador – o si no, daño o herida puede ocurrir.
6. SIEMPRE prueba que el andador y accesorios están puestos seguramente en la posición abiertos ANTES de uso.
7. Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero esta seguramente apretados.
8. SIEMPRE use caución cuando usando el andador en superficies mojados y resbalosos. NO USE el andador en escaleras o inclinadas.
9. Antes de intentar alcanzar objetos o recogerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegura sus pies en el piso. Usa caución EXTREMO cuando alcanzando por cual quiere objeto.
10. GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.
11. Examine su andador para función normal y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplace de partes.

ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Cuido debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de altura están seguros, y que las ruedas (si aplicable) y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el andador.
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsabilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, asamblea o uso de este producto.
- Examina el producto regularmente o en una rutina de mantenimiento preventivo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente en la posición abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es diseño para soportar todo el peso del usuario.

ADVERTENCIAS DE ESTABILIDAD

Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos mientras utilizando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso del andador y puede causar que se de vuelta el andador, resultando en herida o dano.



ENSAMBLAJE DEL ANDADOR

1. Remueva el Andador cerrado del cartón.
2. Instala las patas apretando el botón de ajustamiento y desliza sobre el armazón del andador hasta que el botón se engancha en el hueco deseado. Ajusta todas las patas a la misma altura.
3. Repite para la otra manga.
4. Empuje las mangas y los lados afuera hasta que se asegura los mecanismos en posición.

ADVERTENCIA: Asegura que todos los botones sobresalen completamente por los huecos de ajustamiento, que todas las patas están ajustadas a la misma altura y que las patas con ruedas están posicionadas en la parte de frente y sobre la parte afuera del andador.

CERRANDO EL ANDADOR

1. Aprete hacia abajo en los botones de desconexión y aguanta.
2. Agarre la manga y empuja hacia el centro del andador.
3. Repite para la otra manga

AJUSTANDO LA ALTURA

NOTA: Debe ser ajustado a la altura deseado antes de operación.

Consulta con su profesional de cuidado de salud para ajustamiento apropiado.

1. Para ajustar la altura de las patas, apreté el botón de ajustamiento y deslice hacia arriba y abajo a la altura deseado.
2. Ajusta la altura del andador en alineando todas cuatro patas a la misma posición de altura.

Quando caminando, el usuario debe agarrar una manga con cada mano, posicionando el cuerpo dentro las patas a traseras, y caminando a un paso confortable. Las patas a traseras deben estar en contacto con el piso todo el tiempo.

MANTENIMIENTO

- Para polvo, limpie el andador con una toalla suave y mojada.
- Examine las ruedas (si aplicable) por daño y desgaste periódicamente. Utilice un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiere parte del andador.
- Examine su andador seminal para función y desgaste. Si algunos componentes so están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos están sueltos, **NO LOS** use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su andador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

Features

- Combination of folding walker and rising aid all in one
- Secondary handles provide stable assistance from a seated to a standing position
- Can also be used as a portable toilet safety frame
- 400 lb weight capacity - EVENLY DISTRIBUTED
- Adjustable height fits a broad range of user heights
- Attractive, upscale Onyx finish

Características

- Combinación de andador doblado y ayuda a levantar todo en uno
- Mangos secundarios dan asistencia estable de una posición sentado a parado
- También puede ser utilizado como marco de seguridad de inodoro
- Capacidad de peso de 400 lb - Distribuido Uniformemente
- Altura ajustable para rango amplio de alturas de usuario
- Acabado atractivo lujoso de ónix

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com