

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE**

**IMPORTANT SAFETY INFORMATION: PLEASE READ**

- ⚠ **WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using the Bath Seat. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the Bath Seat is not properly assembled and adjusted, personal injury and damage to the Bath Seat could result.**
- ⚠ **WARNING: If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. ("Graham-Field") distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the Bath Seat.**
- ⚠ **WARNING: GF Health Products, Inc. ("GF") assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.**

**INTENDED USE**

The Bath Seat is intended for use by individuals who require seating support while bathing or showering. It is designed to be placed fully inside the bathtub or shower.

**Contraindications**

- ⚠ **WARNING: This product has a maximum weight capacity of 350 lb (159 kg), EVENLY DISTRIBUTED.**
- ⚠ **WARNING: DO NOT use this product as a transfer bench or climbing device.**
- ⚠ **WARNING: Use this product only with tub floors wider than 18 3/4".**

**ASSEMBLY**

Remove the Bath Seat from the box and place it on a flat, dry surface.



7921R / 7921KD-1

## Attaching the Legs

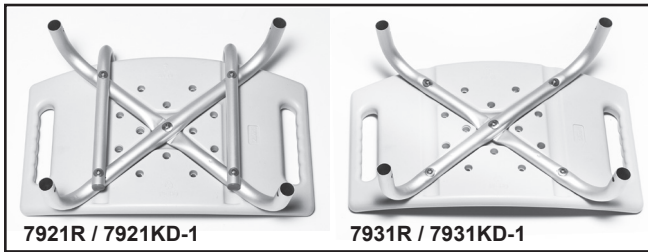


fig. 1



fig. 2



fig. 3

1. Locate the seat frame (see fig. 1); place it upside down on a flat, dry surface.
2. Locate the legs (see fig. 2).
3. Attach the legs to the seat frame (see fig. 3). Depress the locking button at the top of each leg and slide it into the seat frame until the button protrudes from the hole.
4. Repeat step 3 for each leg.

**⚠ WARNING: Ensure legs are securely installed and all hardware is tight before proceeding.**

## Attaching the Backrest: (Model 7921R and 7921KD Series Only)



fig. 4



fig. 5

1. Locate the backrest (see fig. 4).
2. Attach the backrest to the seat frame (see fig. 5). Depress the locking buttons and slide the backrest onto the seat frame until the buttons protrude from the holes.

**⚠ WARNING: Ensure backrest is securely installed and all hardware is tight before proceeding.**

## All Models

**⚠ WARNING: Ensure the Bath Seat is assembled as described. If the Bath Seat is not properly assembled and installed, personal injury and damage to the Bath Seat could result.**

## OPERATION

See assembled Bath Seat at right. Contact your GF distributor immediately if you see any issue with fit, form, function, or safety. For more information on GF Health Products, Inc. parts and services, please contact your GF distributor or [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

### Adjusting Leg Height

Push in the adjustment button and move to the desired height position until it clicks into place. Ensure legs are locked at the same height and all leg adjustment buttons protrude fully through adjustment holes.

**⚠ WARNING: Ensure all Bath Seat components are secure before each use.**

### Center of Balance During Use

The point where the Bath Seat will tip forward, rearward or sideward is determined by its center of balance and stability, and the center of balance and stability is affected by the user's body position and weight distribution. If you fail to heed the following warnings, falling or tipping may occur and could cause severe personal injury.

**⚠ WARNING: To avoid falling or tipping:**

**Have someone help you until you know the balance points of your Bath Seat and how to avoid tipping.**

**Do not put downward weight on one side or corner of the Bath Seat.**

**Do not put downward weight on the backrest.**

**Do not reach or lean if you must shift your weight to do so. Ask for help or use a device to extend your reach.**

**Never try to reach an object if you must move forward in your seat and your buttocks do not stay in full contact with the seat.**

**Never lean backward to reach an object.**

## MAINTENANCE

**⚠ WARNING: Check the Bath Seat weekly for signs of damage or cracking. If damage or cracking of any component of the Bath Seat is found, DO NOT use the Bath Seat. Contact your Graham-Field distributor.**

Inspect the Bath Seat weekly and ensure all components are secure.

To clean the Bath Seat, wash it with soap and water or a mild detergent, then rinse. Ensure the Bath Seat is rinsed well before use.



**fig. 6**

# LIMITED WARRANTY

## SCOPE OF WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the Original Purchaser only that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. All warranties are conditioned upon the proper use of the products strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. To the extent that a third party warrants a component, GF conveys all of its rights under that warranty to the Original Purchaser, to the extent permitted. Original Purchaser is one who purchases this product new and unused from GF or a Certified GF Dealer/Distributor.

This limited warranty shall only apply to defects that are reported in accordance with the provisions set forth in this warranty document, within the applicable warranty period and which, upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. (See Obtaining Warranty Service below) This limited warranty is not transferable.

The warranted components and time periods are set forth below:

Frame.....	three (3) years
Seat/back, extension legs, and arms.....	six (6) months
Normal wear components such as tips, wheels/casters, and handgrips.....	three (3) months

\*Labor is not included in the warranty.

†The warranty period is as designated above. If a part is replaced under warranty, the original warranty period will not be affected. All other replacement parts will be subject to the warranty period specified.

The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Original Purchaser, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of warranty period or the expiration date.

## OBTAINING WARRANTY SERVICE

Contact the Dealer/Distributor from whom the product was purchased. If there is not a Dealer/Distributor, you must contact GF directly by calling (678) 291-3207, sending a fax request to 770-368-2386 or by e-mailing a request to [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). The Customer Service Representative will provide specific directions. Failure to abide by the specific directions will result in denial of the warranty claim.

## EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following:

- 1) Defects, damage, or other conditions caused, in whole or in part, by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner;
- 2) Products which are not installed, used, or properly cleaned and maintained as required in the official manual for the applicable product;
- 3) Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
- 4) Accessories or parts not provided by GF;
- 5) Matching of color, grain or texture except to commercially acceptable standards;
- 6) Changes in color caused by natural or artificial light;
- 7) Charges by anyone for adjustments, repairs, replacement parts, installation or other work performed upon or in connection with such products which are not expressly authorized in writing, in advance, by GF;
- 8) Any labor or shipping charges incurred in the replacement part installation or repair;
- 9) Costs and expenses of regular maintenance and cleaning; and
- 10) Representations and warranties made by any person or entity other than GF.

## ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PARTS. GF SHALL NOT BE LIABLE FOR AND HEREBY DISCLAIMS ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS. CERTAIN STATES AND COUNTRIES MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES AND IN THOSE INSTANCES, GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

The warranties contained herein, together with GF's current Terms and Conditions, contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this product or this warranty, please contact a GF Customer Service Representative.

## NOTES:

- 1) Additional terms and conditions may apply. See GF's General Terms and Conditions on its website: [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).
- 2) Freight claims must be notated on the appropriate shipping documents and must be made with immediacy. International, federal and state regulations govern specific requirements for freight claims. Failure to abide by those regulations may result in a denial of the freight claim. GF will assist you in filing the freight claim.
- 3) Claims for any short shipment must be made within three (3) days of the invoice date.



Manufactured For:  
GF Health Products, Inc.  
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340  
Made in China



+1 770.368.4700

Information contained herein is subject to change without notice.  
The most current and complete product information can be found on our website.  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)



© 2005, GF Health Products, Inc. All Rights Reserved.  
Lumex is a registered trademark of GF Health Products, Inc.

LX\_7921KD-INS-LAB-RevD23

## IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: POR FAVOR, LEA

- ⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar la Silla de Bañera. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud para dirección en el uso de este producto. Si la Silla de Bañera no está ensamblado e ajustado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su GF Health Products, Inc. ("Graham-Field") distribuidor inmediatamente. **NO** substituya piezas. Utilice únicamente partes de reemplazo de Lumex. Partes de reemplazo que no son de Lumex podrían causar herida personal y daños a la Silla de Bañera.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. ("GF") no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

## USO INTENCIONADO

La Silla de Bañera está diseñado para uso por las personas que necesitan apoyo para sentarse mientras se baña o se ducha. Está diseñado para ser colocado totalmente dentro de la bañera o ducha.

## Contraindicaciones

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 350 lb (159 kg), **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.**
- ⚠ **ADVERTENCIA:** **NO** utilice este producto como banco de transferir o dispositivo de la escalada.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Use este producto solo con pisos de bañera mas anchos que 18 3/4".



7921R / 7921KD-1

## MONTAJE

Quite la Silla de Bañera de la caja y colóquelo sobre una superficie plana y seca.

## Sujetando las patas

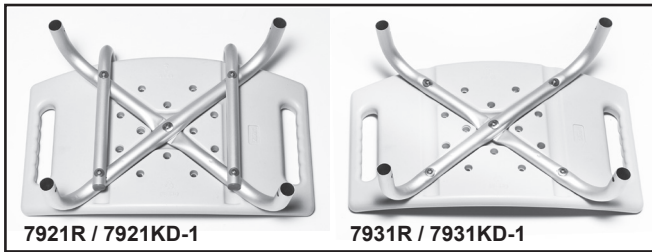


fig. 1



fig. 2



fig. 3

1. Localice el marco del asiento (véase la fig. 1); colóquelo boca abajo sobre una superficie plana y seca.
2. Localice las patas (véase la fig. 2).
3. Instale las patas en el marco del asiento (véase la fig. 3). Presione el botón de cerradura en la parte superior de cada pata e introdúzcala en el marco del asiento hasta que el botón sobresale por el hueco.
4. Repita el paso 3 para cada pata.

## Sujetando el respaldo: (7921R y 7921KD-1 solamente)



fig. 4



fig. 5

1. Localice el respaldo (véase la fig. 4).
2. Instale el respaldo en el marco del asiento (véase la fig. 5). Presione los botones de cerradura y deslice el respaldo en el marco del asiento hasta que los botones sobresalen de los huecos.

**⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que el respaldo esté bien instalado y todo la ferretería esté apretado antes de continuar.

## Todos los modelos

**⚠ ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la Silla de Bañera se monta tal como se describe. Si la Silla de Bañera no está ensamblado e instalado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.

## OPERACIÓN

Véase la Silla de Bañera ensamblada a la derecha. Comuníquese con su distribuidor de GF inmediatamente si ve algún problema con el ajuste, forma, función, o la seguridad. Para obtener más información sobre GF Health Products, Inc. partes y servicios, por favor, contacte con su distribuidor o [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

### Ajustando la Altura de las Patas

Presione el botón de ajuste y pase la pata a la posición deseada hasta que enganche en su lugar. Asegúrese de que las patas están cerradas a la misma altura y todos los botones de ajuste sobresalen completamente de los huecos de ajuste.

**⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todos los componentes de la Silla de Bañera estén bien instalados antes de cada uso.**

### Centro de Gravedad Durante Uso

El punto en que la Silla de Bañera se incline hacia delante, hacia atrás o hacia un lado está determinada por su centro de equilibrio y estabilidad, y el centro de equilibrio y estabilidad se ve afectada por la posición del cuerpo del usuario y la distribución del peso. Si no obedece las siguientes advertencias, caerse o volcarse pueden ocurrir y pueden causar herida personal grave.

**⚠ ADVERTENCIA: Para evitar caerse o volcarse:**

**Pídale a alguien que le ayude hasta que conozca los puntos de equilibrio de su Silla de Bañera y la forma de evitar volcarse.**

**No ponga peso hacia abajo en un lado o en la esquina de la Silla de Bañera.**

**No ponga peso hacia abajo en el respaldo.**

**No se estire o incline si debe cambiar su peso para hacerlo. Pida ayuda o utilizar un dispositivo para ampliar su alcance.**

**Nunca trate de alcanzar un objeto si tiene que seguir adelante en su silla y los glúteos no se quedan en pleno contacto con la silla.**

**Nunca se incline hacia atrás para llegar a un objeto.**

## MANTENIMIENTO

**⚠ ADVERTENCIA: Revise la Silla de Bañera cada semana para detectar signos de daños o grietas. Si se encuentra el daño o rotura de cualquiera de los componentes de la Silla de Bañera, NO use la Silla de Bañera. Comuníquese con su proveedor de Graham-Field.**

Inspeccione la Silla de Bañera semanalmente y asegúrese de que todos los componentes estén bien instalados.

Para limpiar la Silla de Bañera, lávela con agua y jabón o un detergente suave, luego enjuague. Asegúrese de que la Silla de Bañera está bien enjuagarse antes de usar.



fig. 6

# GARANTÍA LIMITADA

## AMBITO DE GARANTÍA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado de los productos en acuerdo con practicas de buen negocio y aplicable con los instrucciones y manuales de GF, incluyendo uso apropiado. A la medida que un tercer parte garantiza un componente, GF transmite todos nuestros derechos debajo ese garantía al Comprador Original, a la medida permitido. El comprador original es el quien compra este product nuevo y no usado por GF o un Distribuidor Certificado.

Esta garantía limitada solamente se aplica por los defectos reportados en conformidad con los proviciones estabilizados en este garantía documento, dentro del period de garantía aplicable y cual con examinacion por GF o su representante autorizado, da prueba del producto en garantía. (lea Obteniendo Servicio de Garantía abajo). Esta garantía limitada no es transferible.

El marco..... tres (3) años  
El asiento / respaldo, las piernas de extensión y los brazos.....seis (6) meses  
Los componentes de uso normal, tales como puntas, ruedas y manijas.....three (3) meses

El período de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la período de garantía o la fecha de expiración.

## OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

Comunicase con el Distribuidor de donde compraste el producto. . Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando 678-291-3207, mandando fax a 1-770-368-2386 o por email a [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes. Falla de seguir las direcciones especificos se resultara en negacion de su reclamacion de garantía.

## EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

- 1) Defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna;
- 2) Productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual oficial aplicable para el producto;
- 3) Productos que se consideran que no son de naturaleza duradera, incluyendo, pero sin limitarse a: puntas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes, y gráficos;
- 4) Accesorios o piezas no suministradas por GF;
- 5) Pareo de color, grano o textura except a los aceptables por los normas
- 6) Cambios en color causado or luz natural o artificial
- 7) Cargos por concepto de ajustes, reparaciones, piezas de recambio, instalación u otro trabajo realizado en o relacionados con tales productos que no estén autorizados expresamente por escrito, de antemano, por GF;
- 8) Cualquier gasto de mano de obra o de envío que se incurra en la instalación de la pieza de reemplazo o la reparación;
- 9) Costos y gastos del mantenimiento y limpieza regular; y
- 10) Representaciones y garantías hechas por cualquier persona o entidad que no sea GF.

## GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO PROVEÍDO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTIVA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PARA PERDIDA DE BENEFICIO O GANANCIA, PERDIDA DE USO, INACTIVO, O SALARIOS DE EMPLEADOS O TRABAJADORES CONTRACTORES, PAGOS O BENEFICIOS. ALGUNOS ESTADOS Y PAISES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

Las garantías contenidos, juntos con los Terminos y Condiciones de GF, contienen todo la representaciones y garantías con respecto a sujeto de este document, y reemplaza cual quieres negociaciones, contratos de antes. El beneficiario de este document reconoce y representa que no haya fijado en otro representacion, afirmacion, garantía, collateral o contrato solamente en los de este document.

Por informacion adicional en este producto o garantía, por favor de comunicarse con un Representante de Servicio de Consumidor de GF.

## NOTAS:

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Lea los Terminos y Condiciones de GF en la pagina de web [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)
- 2) Las reclamaciones de flete se deben anotar en los documentos de embarque apropiados y deben hacerse con inmediatez. Los requisitos especificos para las reclamaciones de fletes se rigen por regulaciones internacionales, federales y estatales. El incumplimiento de estas regulaciones podría resul tar en la denegación de la reclamación de flete. GF le ayudará en la presentación de la reclamación de flete.
- 3) Las reclamaciones de embarques con faltantes se deben realizar en un plazo de tres (3) dias de la fecha de la factura.

**LUMEX®**  
by graham-field

Fabricado para  
GF Health Products, Inc.  
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340  
Fabricado en China



+1 770.368.4700

© 2005, GF Health Products, Inc. Todos los derechos reservados.  
Graham-Field y Lumex son marcas de GF Health Products, Inc.

Inf La información contenida en este documento está sujeta a cambios.  
La información más actualizada y completa del producto se puede encontrar en nuestra página web  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

**graham**  
**field**

LX\_7921KD-INS-LAB-RevD23