

**SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE**


**IMPORTANT SAFETY INFORMATION: PLEASE READ**

- ⚠ WARNING: Read and understand these instructions before assembling or using the 3-in-1 Folding Steel Commode. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the 3-in-1 Folding Steel Commode is not properly assembled and installed, personal injury and damage to the 3-in-1 Folding Steel Commode could result.**
- ⚠ WARNING: If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the 3-in-1 Folding Steel Commode.**
- ⚠ WARNING: This product has a maximum weight capacity of 300 lb (136 kg), EVENLY DISTRIBUTED.**
- ⚠ WARNING: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer and reproductive or developmental harm.**
- ⚠ WARNING: GF Health Products, Inc. (“GF”) assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.**

**INTENDED USE**

The Lumex 7108A 3-in-1 Folding Steel Commode(s) may be used as a bedside commode, raised toilet seat, or toilet safety frame. It is intended to provide assistance to those who have difficulty sitting down or standing up from the toilet or need additional support and stability during toileting.

## **SETUP (REFER TO PICTURE BELOW)**

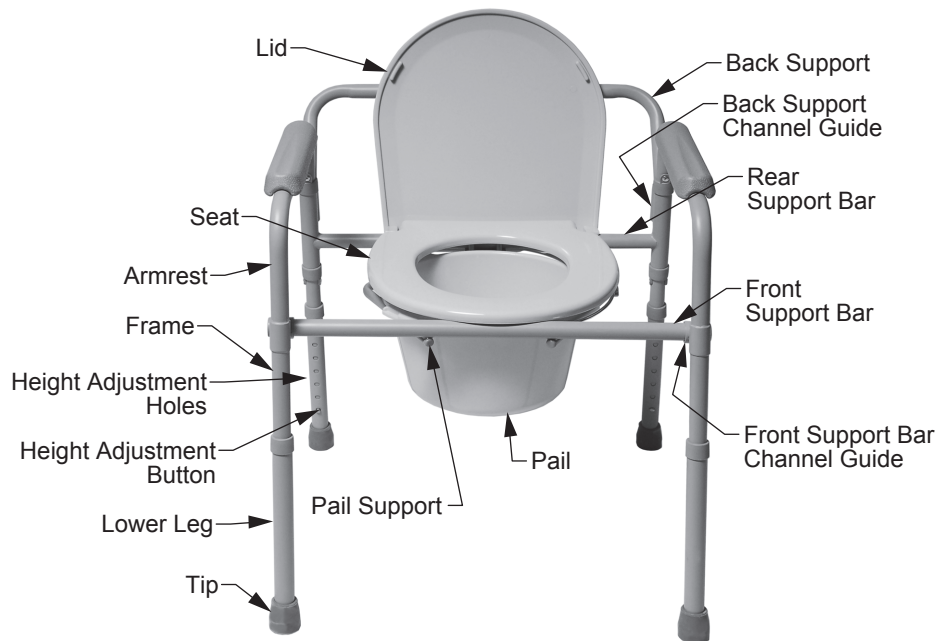

### **▲ NOTICE: DO NOT use excessive force when installing the seat and lid.**

1. Remove frame, seat, lid, pail, cover, and splash guard from carton.
2. Attach front support bar to armrest by depressing the locking button and sliding into the front support bar channel guide until it clicks into place. Repeat for other side. Ensure the locking buttons protrude fully from the holes.
3. Attach seat to rear support bar. Push down firmly until the seat snaps into place.

**⚠ WARNING: When installing the seat on the frame, ensure the seat is evenly spaced between the side frames to ensure proper stability.**

4. Attach lid to rear support bar.
5. In the upright position, place splash shield or pail and cover in frame.

### **Adjusting Commode Height**

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button clicks into place in the desired hole.
2. Repeat for other 3 legs.

**⚠ WARNING: Ensure that all four commode legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.**

## **Inserting Back Support**

1. Remove back support from carton.
2. Insert back support into channel guides until back support locking buttons click into place in channel guide holes.

**⚠ WARNING: Ensure that locking buttons protrude fully through holes before use.**

## **Use Commode over Toilet**

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Remove commode pail and lid.
3. Position splash guard in place on pail supports.
4. Remove back support (described in previous steps).
5. Lift toilet bowl seat.
6. Place commode over toilet with splash shield positioned over the center of the toilet bowl. Commode is now ready for use. Clean seat and splash guard with disinfectant after each use.

## **Use as Bedside Commode**

1. Set commode to desired height (described in previous steps).
2. Lift commode seat and lid and place commode pail on pail supports. Ensure that pail is properly positioned below commode opening.
3. Place commode seat down. Commode is now ready for use.
4. When user is finished using commode, place commode pail lid over commode pail to contain odors.
5. Remove pail and lid simultaneously to empty pail. Clean seat and pail with disinfectant after each use.

## **MAINTENANCE**

**⚠ WARNING: Inspect frequently to ensure that all attaching hardware is tight.**

**⚠ WARNING: Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them IMMEDIATELY if any of these conditions exist.**

**▲ NOTICE: Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.**

**After each use:** Dry with a soft cloth.

**Cleaning:** Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.

To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc authorized distributor.

## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the Original Purchaser only that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. All warranties are conditioned upon the proper use of the products strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. To the extent that a third party warrants a component, GF conveys all of its rights under that warranty to the Original Purchaser, to the extent permitted. Original Purchaser is one who purchases this product new and unused from GF or a Certified GF Dealer/Distributor.

This limited warranty shall only apply to defects that are reported in accordance with the provisions set forth in this warranty document, within the applicable warranty period and which, upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. (See Obtaining Warranty Service below) This limited warranty is not transferable.

The warranted components and time periods are set forth below:

Frame:.....(three) 3 years

All Other Components.....(six) 6 months

\*Labor is not included in the warranty.

†The warranty period is as designated above. If a part is replaced under warranty, the original warranty period will not be affected. All other replacement parts will be subject to the warranty period specified.

The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Original Purchaser, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of warranty period or the expiration date.

### OBTAINING WARRANTY SERVICE

Contact the Dealer/Distributor from whom the product was purchased. If there is not a Dealer/Distributor, you must contact GF directly by calling (770) 368-4700, sending a fax request to 770-368-4932 or by e-mailing a request to [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). The Customer Service Representative will provide specific directions. Failure to abide by the specific directions will result in denial of the warranty claim.

### EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following:

- 1) Defects, damage, or other conditions caused, in whole or in part, by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner;
- 2) Products which are not installed, used, or properly cleaned and maintained as required in the official manual for the applicable product;
- 3) Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
- 4) Accessories or parts not provided by GF;
- 5) Matching of color, grain or texture except to commercially acceptable standards;
- 6) Changes in color caused by natural or artificial light;
- 7) Charges by anyone for adjustments, repairs, replacement parts, installation or other work performed upon or in connection with such products which are not expressly authorized in writing, in advance, by GF;
- 8) Any labor or shipping charges incurred in the replacement part installation or repair;
- 9) Costs and expenses of regular maintenance and cleaning; and
- 10) Representations and warranties made by any person or entity other than GF.

### ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PARTS. GF SHALL NOT BE LIABLE FOR AND HEREBY DISCLAIMS ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS. CERTAIN STATES AND COUNTRIES MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES AND IN THOSE INSTANCES, GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

The warranties contained herein, together with GF's current Terms and Conditions, contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this product or this warranty, please contact a GF Customer Service Representative.

### NOTES:

- 1) Additional terms and conditions may apply. See GF's General Terms and Conditions on its website: [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).
- 2) Freight claims must be notated on the appropriate shipping documents and must be made with immediacy. International, federal and state regulations govern specific requirements for freight claims. Failure to abide by those regulations may result in a denial of the freight claim. GF will assist you in filing the freight claim.
- 3) Claims for any short shipment must be made within three (3) days of the invoice date.

**LUMEX**<sup>®</sup>  
by graham-field

Manufactured For:

GF Health Products, Inc.  
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340  
Made in China



+1 770.368.4700

Information contained herein is subject to change without notice.  
The most current and complete product information can be found on our website.  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

**graham**  
**field**

© 2010, GF Health Products, Inc. All Rights Reserved.  
Lumex is a registered trademark of GF Health Products, Inc.

LX\_7108R-INS-LAB-RevC23


**IMPORTANTE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD: POR FAVOR, LEA**

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el Inodoro Plegable de Acero. Si no entiende alguna parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, comuníquese con un profesional de la salud para dirección en el uso de este producto. Si el Inodoro Plegable de Acero no está ensamblado e instalado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor inmediatamente. No sustituya piezas. Utilice únicamente partes de reemplazo de Lumex. Partes de reemplazo que no son de Lumex podrían causar herida personal y daños al Inodoro Plegable de Acero.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto tiene una capacidad máxima de peso de 300 lb (136 kg), **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.**
- ⚠ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. (“GF”) no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.

**USO INTENCIONADO**

El Lumex 7108A Inodoro Plegable de Acero se puede utilizar como inodoro de uso de dormitorio, levantó asiento del inodoro, o marco de seguridad higiénico. Su objetivo es prestar asistencia a aquellos que tienen dificultades para sentarse o levantarse de la taza del baño o la necesidad de apoyo y estabilidad adicional durante ir al baño.

## **MONTAJE (VÉASE LA IMAGEN A CONTINUACIÓN)**

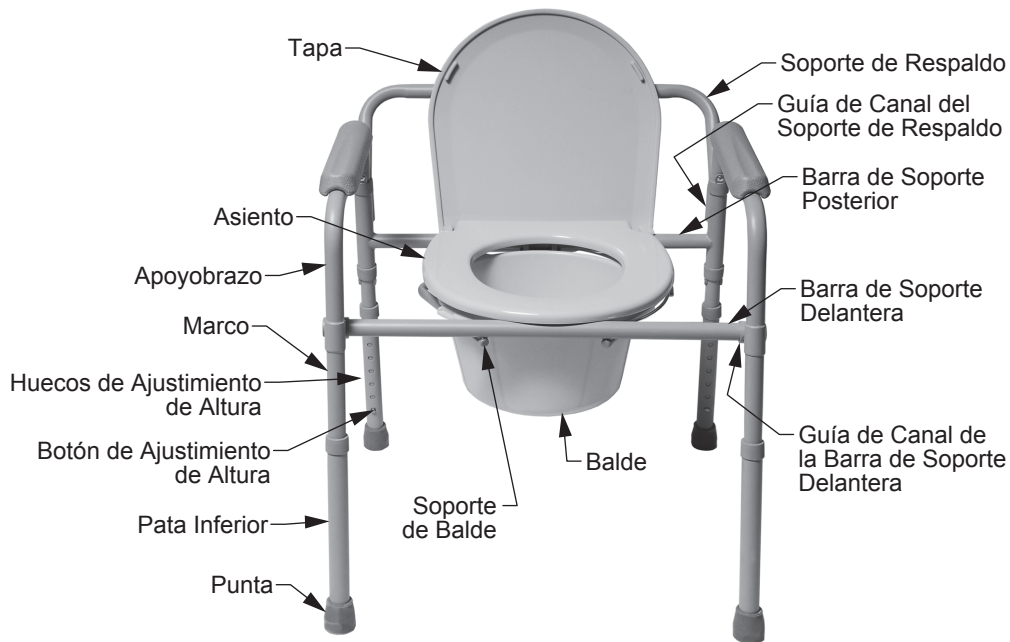

### **▲ AVISO: NO utilice esfuerzo excesivo cuando instalando el asiento y la tapa.**

1. Saque el marco, asiento, tapa, balde, tapa del balde y el escudo de salpicadura del cartón.
2. Sujete la barra de soporte delantera al apoyabrazos empujando en el botón de cierre y poniendo en la guía de canal de la barra de soporte delantera hasta que enganche en su lugar. Repita para el otro lado. Asegúrese de que los botones de cierre sobresalen completamente de los huecos.
3. Sujete el asiento a la barra de soporte posterior. Apriete firmemente hasta que el asiento enganche en su lugar.

### **⚠ ADVERTENCIA: Cuando está instalando el asiento en el marco, asegúrese de que el asiento está puesto dentro el centro de los marcos del lado para asegurar estabilidad apropiado.**

4. Sujeta la tapa a la barra de soporte posterior.
5. En la posición vertical, coloque el balde en el marco.

### **Ajustando la Altura del Inodoro**

1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la pata inferior hasta que enganche en su lugar en el hueco deseado.
2. Repita para las otras 3 patas.

### **⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que todas cuatro patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen de los huecos antes de uso.**

## **Instalando el Soporte de Respaldo**

1. Saque el soporte de respaldo del cartón.
2. Inserte el soporte de respaldo en las guías de canal hasta que los botones de cierre enganchen en su lugar.

**⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que los botones de cierre sobresalen completamente de los huecos antes de uso.**

## **Utilizar el Inodoro Sobre el Inodoro de Casa**

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Retire el balde y la tapa del inodoro.
3. Coloque el escudo de salpicadura en sitio en los soportes de balde.
4. Retire el soporte de respaldo (descrito en los pasos anteriores).
5. Levante el asiento de la taza de servicio.
6. Ponga el inodoro sobre la taza de servicio con el escudo de salpicadura sobre el centro de la taza de servicio. El inodoro está listo para utilizar. Limpie el asiento y el escudo de salpicadura con desinfectante después de cada uso.

## **Utilizar como Inodoro de Uso de Dormitorio**

1. Ajuste el inodoro a la altura deseada (descrito en los pasos anteriores).
2. Levante el asiento y la tapa y ponga el balde del inodoro en los soportes del balde. Asegúrese de que el balde está posicionado apropiadamente debajo de la abertura del inodoro.
3. Ponga el asiento del inodoro abajo. El Inodoro está listo para uso.
4. Cuando usuario ha terminado de usar el inodoro, ponga la tapa del balde para contener olor.
5. Retire el balde y la tapa al mismo tiempo para vaciar el balde. Limpie el asiento y balde con desinfectante después de cada uso.

## **MANTENIMIENTO**

**⚠ ADVERTENCIA: Inspeccione con frecuencia para asegurar que la ferretería, tornillos y perillas estén bien apretados.**

**⚠ ADVERTENCIA: Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace INMEDIATAMENTE si estas condiciones existen.**

**▲ AVISO: Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cualquier parte de este banco de transferir.**

**Después de cada uso:** Seque con un paño suave.

**Limpieza:** Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia, y seca con una toalla suave. Asegúrese de que el banco de transferir esté enjuagado bien antes de uso.

Para garantizar el servicio mejor de su banco de transferir, siempre pide partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

## **GARANTÍA LIMITADA**

### **AMBITO DE GARANTÍA**

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado de los productos en acuerdo con practicas de buen negocio y aplicable con los instrucciones y manuales de GF, incluyendo uso apropiado. A la medida que un tercer parte garantiza un componente, GF transmite todos nuestros derechos debajo ese garantía al Comprador Original, a la medida permitido. El comprador original es el quien compra este product nuevo y no usado por GF o un Distribuidor Certificado.

Esta garantía limitada solamente se aplica por los defectos reportados en conformidad con los proviciones estabalizados en este garantía documento, dentro del period de garantía aplicable y cual con examinacion por GF o su representate autorizado, da prueba del producto en garantía. (lea Obteniendo Servicio de Garantía abajo). Esta garantía limitada no es transferible.

Marco:.....tres (3) años

Todos los demás componentes:.....seis (6) meses

El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

### **OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA**

Comunicase con el Distribuidor de donde compraste el producto. . Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando 770-368-4700, mandando fax a 1-770-368-4932 o por email a [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes. Falla de seguir las dirrecciones especificos se resultara en negacion de su reclamacion de garantía.

### **EXCLUSIONES**

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

- 1) Defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna;
- 2) Productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual oficial aplicable para el producto;
- 3) Productos que se consideran que no son de naturaleza duradera, incluyendo, pero sin limitarse a: puntas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes, y gráficos;
- 4) Accesorios o piezas no suministradas por GF;
- 5) Pareo de color, grano o textura except a los aceptables por los normas
- 6) Cambios en color causado or luz natural o artificial
- 7) Cargos por concepto de ajustes, reparaciones, piezas de recambio, instalación u otro trabajo realizado en o relacionados con tales productos que no estén autorizados expresamente por escrito, de antemano, por GF;
- 8) Cualquier gasto de mano de obra o de envío que se incurra en la instalación de la pieza de reemplazo o la reparación;
- 9) Costos y gastos del mantenimiento y limpieza regular; y
- 10) Representaciones y garantías hechas por cualquier persona o entidad que no sea GF.

### **GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE**

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO PROVEÍDO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PARA PERDIDA DE BENEFICIO O GANANCIA, PERDIDA DE USO, INACTIVO, O SALARIOS DE EMPLEADOS O TRABAJADORES CONTRACTORES, PAGOS O BENEFICIOS. ALGUNOS ESTADOS Y PAISES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

Las garantías contenidos, juntos con los Terminos y Condiciones de GF, contienen todo la representaciones y garantías con respecto a sujeto de este document, y reemplaza cual quier negaciones, contratos de antes. El beneficiario de este document reconoce y representa que no haya fijado en otro representacion, afirmacion, garantía, collateral o contrato solamente en los de este document.

Por informacion adicional en este producto o garantía, por favor de comunicarse con un Representante de Servicio de Consumidor de GF.

### **NOTAS:**

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Lea los Terminos y Condiciones de GF en la pagina de web [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)
- 2) Las reclamaciones de flete se deben anotar en los documentos de embarque apropiados y deben hacerse con inmediatez. Los requisitos especificos para las reclamaciones de fletes se rigen por regulaciones internacionales, federales y estatales. El incumplimiento de estas regulaciones podría resul tar en la denegación de la reclamación de flete. GF le ayudará en la presentación de la reclamación de flete.
- 3) Las reclamaciones de embarques con faltantes se deben realizar en un plazo de tres (3) días de la fecha de la factura.

**LUMEX<sup>®</sup>**  
by graham-field

Fabricado para  
GF Health Products, Inc.  
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340  
Fabricado en China



+1 770.368.4700

© 2010, GF Health Products, Inc. Todos los derechos reservados.  
Graham-Field y Lumex son marcas de GF Health Products, Inc.

Inf La información contenida en este documento está sujeta a cambios.  
La información más actualizada y completa del producto se puede encontrar en nuestra página web  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

**graham**  
**field**

LX\_7108-INS-LAB-RevC23