

### SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE


- ⚠ **WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using your Lumex Drop Arm VersaMode™. If you do not understand any part of these warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the VersaMode is not properly adjusted, personal injury and damage to the VersaMode could result.**
- ⚠ **WARNING: If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. ("GF") authorized distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only Lumex replacement parts. Non-Lumex replacement parts could cause personal injury and damage to the VersaMode™.**
- ⚠ **WARNING: This product has a maximum weight capacity of 300 lb (130 kg), EVENLY DISTRIBUTED.**
- ⚠ **WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly or use of this product.**

### INTENDED USE

To provide transport, transfer, and commode functions with one device.

### ASSEMBLY (SEE PICTURE AT RIGHT)

1. Carefully remove components from box.
  2. Install back and arm assembly on base and seat frame assembly by inserting back tubes into base frame tubes. If necessary loosen, but do not remove, knobs.
  3. Tighten knobs at rear seat until secure — do not overtighten.
  4. Install footrests on base frame footrest brackets. Lock footrests into place.
  5. Slide the commode pail in under the seat from the back.
- ⚠ **WARNING: Before use, ensure all components are securely installed and VersaMode is assembled as described above.**

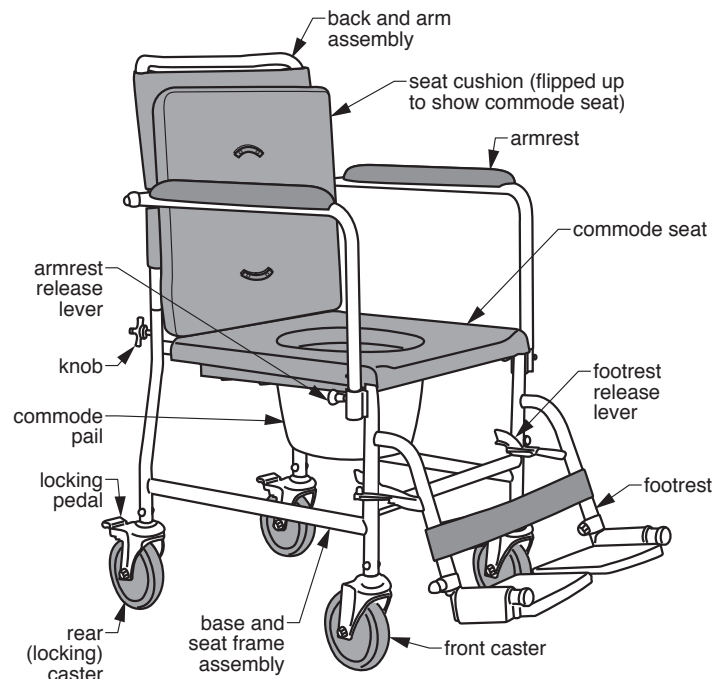

6810A Drop Arm VersaMode

### OPERATION

#### Drop Armrests

The VersaMode armrests drop to facilitate transfer. To drop the armrest, pull the release lever outward until the armrest releases, lift the armrest up out of the socket, then swing it downward.

#### Lock Rear Casters

The rear casters lock into place to prevent movement. To lock, step on the rear pedal until it latches. To unlock, step on the rear pedal until it unlatches.

#### Swing Away / Remove Footrests

The VersaMode footrests swing away or detach to facilitate transfer. To swing the footrest away, depress the footrest release lever and swing it out of the way. To remove the footrest, swing it away, then lift it up off the brackets. To lock the footrest in place, swing it in toward the center of the VersaMode until it locks into place.

### MAINTENANCE

- ⚠ **WARNING: Inspect the VersaMode weekly for proper function and wear; check the fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF authorized distributor for repair and appropriate replacement parts.**

## Cleaning

Clean the VersaMode with a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft, clean cloth. Ensure the VersaMode is well-rinsed before use.

- ▲ **NOTICE: DO NOT use solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the VersaMode.**
- ▲ **NOTICE: Always clean VersaMode as soon as possible after use. To contain odor until VersaMode can be cleaned, replace commode lid on commode pail immediately after use.**

## LIMITED WARRANTY

### SCOPE OF WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the Original Purchaser only that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. All warranties are conditioned upon the proper use of the products strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. To the extent that a third party warrants a component, GF conveys all of its rights under that warranty to the Original Purchaser, to the extent permitted. Original Purchaser is one who purchases this product new and unused from GF or a Certified GF Dealer/Distributor.

This limited warranty shall only apply to defects that are reported in accordance with the provisions set forth in this warranty document, within the applicable warranty period and which, upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. (See Obtaining Warranty Service below) This limited warranty is not transferable.

The warranted components and time periods are set forth below:

Frame:.....three years  
Seat and Back: .....six months  
Extension Legs and Arms:.....six months

\*Labor is not included in the warranty.

†The warranty period is as designated above. If a part is replaced under warranty, the original warranty period will not be affected. All other replacement parts will be subject to the warranty period specified.

The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the Original Purchaser, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of warranty period or the expiration date.

### OBTAINING WARRANTY SERVICE

Contact the Dealer/Distributor from whom the product was purchased. If there is not a Dealer/Distributor, you must contact GF directly by calling (770) 368-4700, sending a fax request to 770-368-4932 or by e-mailing a request to [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). The Customer Service Representative will provide specific directions. Failure to abide by the specific directions will result in denial of the warranty claim.

### EXCLUSIONS

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following:

- 1) Defects, damage, or other conditions caused, in whole or in part, by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner;
- 2) Products which are not installed, used, or properly cleaned and maintained as required in the official manual for the applicable product;
- 3) Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
- 4) Accessories or parts not provided by GF;
- 5) Matching of color, grain or texture except to commercially acceptable standards;
- 6) Changes in color caused by natural or artificial light;
- 7) Charges by anyone for adjustments, repairs, replacement parts, installation or other work performed upon or in connection with such products which are not expressly authorized in writing, in advance, by GF;
- 8) Any labor or shipping charges incurred in the replacement part installation or repair;
- 9) Costs and expenses of regular maintenance and cleaning; and
- 10) Representations and warranties made by any person or entity other than GF.

### ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PARTS. GF SHALL NOT BE LIABLE FOR AND HEREBY DISCLAIMS ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS. CERTAIN STATES AND COUNTRIES MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES AND IN THOSE INSTANCES, GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

The warranties contained herein, together with GF's current Terms and Conditions, contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this product or this warranty, please contact a GF Customer Service Representative.

### NOTES:

- 1) Additional terms and conditions may apply. See GF's General Terms and Conditions on its website: [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).
- 2) Freight claims must be notated on the appropriate shipping documents and must be made with immediacy. International, federal and state regulations govern specific requirements for freight claims. Failure to abide by those regulations may result in a denial of the freight claim. GF will assist you in filing the freight claim.
- 3) Claims for any short shipment must be made within three (3) days of the invoice date.

**LUMEX**<sup>®</sup>  
by graham-field

Manufactured For:

GF Health Products, Inc.  
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340  
Made in China

© 2009, GF Health Products, Inc. All Rights Reserved.  
Lumex is a registered trademark of GF Health Products, Inc.

LX\_6810A-INS-LAB-RevD23



+1 770.368.4700

Information contained herein is subject to change without notice.  
The most current and complete product information can be found on our website.  
[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

graham  
field

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el VersaMode. Si no entiende cualquier parte de estas advertencias, precauciones o instrucciones, contacte a un profesional del cuidado médico para dirección en el uso de este producto. Asegúrese que el VersaMode esté ensamblado como descrito en los párrafos siguientes antes de uso. Si el VersaMode no está ensamblado en la manera correcta, daño personal o a la propiedad puede ocurrir.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor autorizado de GF inmediatamente. No sustituya piezas.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto tiene una capacidad máximo de peso del usuario de 300 lb (130 kg), **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.**
- ⚠ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. ("GF") no asume responsabilidad alguna por daños o heridas causadas por ensamblaje incorrecto de este producto.

### USO PREVISTO

Para proporcionar transporte, transferencia, y funciones de cómoda con un único aparato.

### ENSAMBLAJE (VÉASE LA ILUSTRACIÓN)

1. Quite cuidadosamente los componentes de la caja.
2. Instale el montaje de respaldo y asiento en el montaje de marco bajo y asiento insertando los tubes del respaldo en los tubos del baso. Si es necesario, afloje, pero no retire, las perillas
3. Apriete las perillas en el asiento trasero hasta que sean seguras — no las aprietan demasiado.
4. Instale los reposapiés en los soportes del marco bajo. Trabe los reposapiés en lugar.
5. Resbale el cubo de la cómoda adentro bajo asiento de la parte posterior.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Antes de usar, asegúrese que todos los componentes estén bien sujetos y el VersaMode está ensamblado como descrito.



6810A Drop Arm VersaMode

### OPERACIÓN

#### Dejar Caer los Apoyobrazos

Los apoyobrazos del VersaMode dejan caer para facilitar transferencia. Para caer los apoyobrazos, tire de la palanca hacia fuera hasta que los apoyobrazos desenganchan, levante los apoyobrazos para arriba del zócalo, y hágalos pivotar hacia abajo.

#### Trabarse de las Ruedas Traseras

Las ruedas traseras se traban en lugar para prevenir el movimiento. Para trabarse, caminar en el pedal posterior hasta que trabe. Para abrir, caminar en el pedal posterior hasta que abra.

#### Hacer Pivotar / Separar los Reposapiés

Los reposapiés del VersaMode hacen pivotar lejos o separan para facilitar transferencia. Para hacer pivotar el reposapié lejos, presione la palanca y hágala pivotar apartada. Para quitar el reposapié, hágalo pivotar lejos, después levántelo para arriba de los soportes. Para trabar el reposapié en el lugar, hágalo pivotar adentro hacia el centro del VersaMode hasta que se trabe en lugar.

### MANTENIMIENTO

- ⚠ **ADVERTENCIA:** Revise el VersaMode semanalmente para función propio y uso; asegure que todos los tuercas, tornillo y tiradores están apretados semanalmente. Si algún componente no está trabajando correctamente o se parece usado, contacte a su distribuidor autorizado de GF para reparación y partes reemplazados apropiados.

## Limpiando

Limpie el VersaMode con una solución suave de jabón y agua, aclare con agua clara, entonces séquese con un paño limpio y suave. Asegúrese que el VersaMode esté aclarado bien antes de usar.

▲ **AVISO: NO DEBE usar los solventes, los polvos abrasivos, o los cojines de fregado en cualquier parte del VersaMode.**

▲ **AVISO: Limpie siempre el uso posterior del VersaMode cuanto antes. Para contener olor hasta que el VersaMode puede ser limpiado, sustituya la tapa de la cómoda en la cuba de la cómoda inmediatamente después del uso.**

## GARANTÍA LIMITADA

### AMBITO DE GARANTÍA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado de los productos en acuerdo con practicas de buen negocio y aplicable con los instrucciones y manuales de GF, incluyendo uso apropiado. A la medida que un tercer parte garantiza un componente, GF transmite todos nuestros derechos debajo ese garantía al Comprador Original, a la medida permitido. El comprador original es el quien compra este product nuevo y no usado por GF o un Distribuidor Certificado.

Esta garantía limitada solamente se aplica por los defectos reportados en conformidad con los proviciones estabalizados en este garantía documento, dentro del period de garantía aplicable y cual con examinación por GF o su representate autorizado, da prueba del producto en garantía. (lea Obteniendo Servicio de Garantía abajo). Esta garantía limitada no es transferible.

El Marco:..... tres años

El Asiento y el Respaldo:..... seis meses

Las Piernas de Extensión y los Brazos:..... seis meses

El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

### OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

Comunicase con el Distribuidor de donde compraste el producto. Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando 678-291-3207, mandando fax a 1-770-368-2386 o por email a [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes. Falla de seguir las dirrecciones especificos se resultara en negacion de su reclamacion de garantía.

### EXCLUSIONES

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

- 1) Defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna;
- 2) Productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual oficial aplicable para el producto;
- 3) Productos que se consideran que no son de naturaleza duradera, incluyendo, pero sin limitarse a: puntas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes, y gráficos;
- 4) Accesorios o piezas no suministradas por GF;
- 5) Pareo de color, grano o textura except a los aceptables por los normas
- 6) Cambios en color causado por luz natural o artificial
- 7) Cargos por concepto de ajustes, reparaciones, piezas de recambio, instalación u otro trabajo realizado en o relacionados con tales productos que no estén autorizados expresamente por escrito, de antemano, por GF;
- 8) Cualquier gasto de mano de obra o de envío que se incurra en la instalación de la pieza de reemplazo o la reparación;
- 9) Costos y gastos del mantenimiento y limpieza regular; y
- 10) Representaciones y garantías hechas por cualquier persona o entidad que no sea GF.

### GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLÍCITAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPOSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO PROVEIDO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PARA PERDIDA DE BENEFICIO O GANANCIA, PERDIDA DE USO, INACTIVO, O SALARIOS DE EMPLEADOS O TRABAJADORES CONTRACTORES, PAGOS O BENEFICIOS. ALGUNOS ESTADOS Y PAISES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

Las garantías contenidos, juntos con los Terminos y Condiciones de GF, contienen todo la representaciones y garantías con respecto a sujeto de este document, y reemplaza cual quier negociaciones, contratos de antes. El beneficiario de este document reconoce y represente que no haya fijado en otro representacion, afirmacion, garantía, collateral o contrato solamente en los de este document.

Por informacion adicional en este producto o garantía, por favor de comunicarse con un Representante de Servicio de Consumidor de GF.

### NOTAS:

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Lea los Terminos y Condiciones de GF en la pagina de web [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)
- 2) Las reclamaciones de flete se deben anotar en los documentos de embarque apropiados y deben hacerse con immediatez. Los requisitos especificos para las reclamaciones de fletes se rigen por regulaciones internacionales, federales y estatales. El incumplimiento de estas regulaciones podria resul tar en la denegación de la reclamación de flete. GF le ayudará en la presentación de la reclamación de flete.
- 3) Las reclamaciones de embarques con faltantes se deben realizar en un plazo de tres (3) días de la fecha de la factura.

**LUMEX**<sup>®</sup>  
by graham-field

Fabricado para

GF Health Products, Inc.  
One Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340

Fabricado en China



+1 770.368.4700

© 2009, GF Health Products, Inc. Todos los derechos reservados.  
Graham-Field y Lumex son marcas de GF Health Products, Inc.

Inf La informacion contenida en este documento está sujeta a cambios.  
La información más actualizada y completa del producto se puede encontrar en nuestra página web

[www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

graham  
field

LX\_6810A-INS-LAB-RevD23