

LUMEX[®]

by graham-field

Adjustable Offset Cane with Ortho-Ease Grip

Baston Offset Ajustable con Manga Ortho-Ease

Items 6327 & 6328



*Featuring the original
Therapist-preferred
Ortho-Ease[®] Grip*



graham
field

QTY. 1 EA

SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE


1. This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
2. This product has a maximum user weight limitation of 250 lb. - **EVENLY DISTRIBUTED**. The product is **NOT** designed to support the total weight of individuals.
3. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
4. If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
5. Before use, ensure tip is properly seated and straight. Check rubber tip for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace rubber tip immediately.
6. Always use caution when using this product on wet or slippery surfaces.
7. Inspect product weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
8. Single push button height adjustment **MUST** be fully engaged and protruding through height adjustment hole on cane to ensure a positive lock. **ALWAYS** test to see that cane handle is properly and securely locked in place **BEFORE** using.
9. Make sure locking collet is securely tightened at all times.

GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.

GENERAL WARNING (CONT.)

- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

MAINTENANCE

- Wipe product weekly with a damp cloth.
- Grips may be cleaned with mild soap or detergent. **DO NOT** use organic solvents, such as acetone, which may damage grip.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check locking collet weekly for tightness.
- Replace cane tip as needed.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

Please Read all Instructions Before Use.

The Lumex® Ortho-Ease® grip angle can be adjusted to comfortably fit the user's hand and wrist angle, minimizing stress on the joints.

HEIGHT ADJUSTMENT

1. Loosen locking collet by twisting counter-clockwise.
2. Adjust cane height: Depress push button and slide lower section upward or downward to desired height. The top of the cane should be even with the break in your wrist and/or your hip joint.

NOTE: *An audible "click" will be heard when push button securely protrudes through the adjustment hole.*

3. Secure locking collet by turning clockwise until tight.

ORTHO-EASE® ADJUSTMENT

1. Loosen adjustment screw with slotted screwdriver.
2. Pull grip away from the cane until handgrip is free to rotate.
3. Rotate handgrip to desired position.
4. Push handgrip forward until it is no longer able to rotate and locks into place.
5. Tighten adjustment screw clockwise until secure.

Item Number	Size
6327	Standard (31" - 39")
6328	Extra Long (32" - 41")

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only (“Customer”) for:

Frame: three (3) years

Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on www.grahamfield.com

Ortho-Ease® Grip
Manga de Ortho-Ease


Adjustment Screw
Tornillo de Ajustamiento

Push Button
Botón de Apretar

Locking Collet
Cerradura

Lower Leg Extension
Extension de Pata Inferior

Tip
Punta

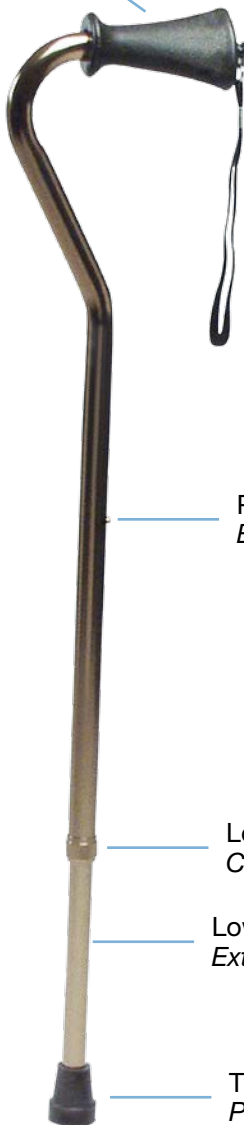

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Este producto no debe ser usado sin instrucciones apropiadas de su profesional de cuidado de salud.
2. Este producto tiene una capacidad de peso máximo de usuario de 250 lb. - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE. Estos bastones NO SON designados para soportar el peso total de individuales.
3. GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
4. Si componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO debe usar partes substitutos.
5. Antes de usar, asegúrese de que la punta esté correctamente asentada y recta. Revise la punta de goma en busca de rasgaduras, roturas, grietas o desgaste. Si existe alguna de estas condiciones, reemplace la punta de goma de inmediato.
6. Siempre tenga cuidado al usar este producto en superficies mojadas o resbaladizas.
7. Examine el producto seminales para función normal y gasto. Si algún componente no esta funcionando correctamente y se ve desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparar y partes de reemplazo.
8. El único botón de ajuste de altura TIENE que sobresalir por el hueco de ajustamiento de altura en el bastón para asegurar que esta asegurado. SIEMPRE prueba para ver si la manga y la altura esta n onto esta cerrado correctamente ANTESde usar.
9. Asegúrese de que el collar de bloqueo esté bien apretado en todo momento

ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Se debe tener cuidado para asegurar que todos los ajustes de altura sean seguros.
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsabilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, asamblea o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en ua rutina de mantenimiento preventativo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente en la posicion abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es diseno para soportar todo el peso del usuario.

MANTENIMIENTO

- Pásale con una toalla húmedo albastón seminal.
- Agarres pueden ser limpiados con jabón o detergente suave.
- NO USE solvente orgánicos como acetona, que puede dañar el agarre.
- Nunca debe usar limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiera parte del bastón.
- Cheque la cerradura seminal para rigidez.
- Reemplace la punta si es necesario.
- Para garantizar el servicio mejor de su producto, siempre especifica partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

INSTRUCCIONES PARA USO

Lea y Entienda Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

El ángulo de la manga Ortho-Ease de Lumex puede ser ajustado para estar en la mano con el ángulo de la muñeca del usuario confortablemente reduciendo tensión en las juntas.

AJUSTE DE ALTURA

1. Afloja la cerradura retorsando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Ajuste la altura del bastón. Apreté el botón y deslice la sección inferior arriba y abajo a la altura deseado. La parte superior del bastón debe ser nivel con su muñeca y/o su articulación de la cadera.

NOTE: *Un "clic" audible se oye cuando el botón se sobresale seguramente por el hueco de ajustamiento.*

3. Asegura la cerradura retorsando en el sentido de las agujas del reloj hasta que este ajustado.

AJUSTAMIENTO DE ORTHO-EASE®

1. Afloja el tornillo de ajustamiento con un destornillador calada.
2. Jale la manga del bastón hasta que la manga esta libre para girar.
3. Gira la manga a la posición deseado.
4. Empuje la manga en el bastón hasta que no se puede girar y está en posición.
5. Apreté el tornillo de ajustamiento hasta que este asegurado.

Item Number	Size
6327	Estándar (31" - 39")
6328	Extra largo (32" - 41")

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este product de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente por:

Marco: tres (3) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y

asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este product antes de uso.

GF va decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compro el producto dentro del periodo de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamand 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas seran suministrado.

A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNOS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Esta garantía te provide derechos legales especificamentos. Usted podra tener otros derechos, que se variar por estado a estado o pais o pais.

Por informacion adicional sobre reclamaciones de garantía, por favor de visitor los terminos y condicions de GF que se encuentran en la pagina www.grahamfield.com

Features

- Ortho-Ease wider grip provides greater support and can be adjusted in angle to minimize stress on the joints.
- Easy height adjustment from 30" – 39" in 1" increments with locking mechanism for added security
- Attractive, designer finish
- 250 lb maximum weight capacity - EVENLY DISTRIBUTED

Características

- Manga mas ancha de Ortho-Ease provee mas soporte y puede ser ajustado en angulo para reducir estress en los articulaciones
- Ajustamiento de altura fácil de 30" – 39" en incrementos de 1" con mecanismo de cerradura para seguridad adicional
- Acabado de diseño atractivo
- Capacidad maximo de peso de 250 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE



For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com