

# LUMEX<sup>®</sup>

by graham-field

## Silver Collection Low Profile Quad Cane

*Bastón con Base Cuadrada de Perfil  
Bajo de la Colección de Plata*

6140 and 6141 series



graham  
field

QTY. 1 EA

## SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE


1. This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
2. This product has a maximum user weight limitation of 300 lb. - **EVENLY DISTRIBUTED**. The product is **NOT** designed to support the total weight of individuals.
3. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
4. If components are damaged or missing, contact your distributor immediately. **DO NOT** use substitute parts.
5. Before use, ensure tip is properly seated and straight. Check rubber tip for rips, tears, cracks or wear. If any of these conditions exist, replace rubber tip immediately.
6. Always use caution when using this product on wet or slippery surfaces.
7. Inspect product weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
8. Single push button height adjustment **MUST** be fully engaged and protruding through height adjustment hole on cane to ensure a positive lock. **ALWAYS** test to see that cane handle is properly and securely locked in place **BEFORE** using.
9. Make sure locking collet is securely tightened at all times.
10. When using a Quad cane, the cane should be placed on a level walking surface with all four legs in contact with the surface. Use of cane in a fashion other than this can lead to eventual cane damage and/or personal injury.

## GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.

## GENERAL WARNING (CONT.)

- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-  
[www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

## INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

## MAINTENANCE

- Wipe product weekly with a damp cloth.
- Grips may be cleaned with mild soap or detergent. **DO NOT** use organic solvents, such as acetone, which may damage grip.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check locking collet weekly for tightness.
- Replace cane tip as needed.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## INSTRUCTIONS FOR USE

*Please Read all Instructions Before Use.*

This cane is designed for users with recommended heights ranging from 4' 10" to 6' 4". Please consult a healthcare professional for the proper height adjustment and usage.

## HEIGHT ADJUSTMENT

1. Remove locking knob by twisting counter-clockwise.
2. Adjust cane height: Depress push button and slide lower section upward or downward to desired height.

**NOTE:** *An audible "click" will be heard when push button securely protrudes through the adjustment hole.*

3. Secure locking knob by reinserting and turning clockwise til tight.

## ADJUSTING FOR RIGHT OR LEFT HANDED USE

1. Loosen locking knob by turning screw knob counter-clockwise.
2. Press the push button and turn cane handle 180° until push button locks in adjustment hole.
3. Secure locking knob by turning screw knob clockwise until tight. DO NOT over tighten.

Item Number	Large Base (12" x 8")
6140A	Silver
6140BK	Black
6140BZ	Bronze
Item Number	Small Base (8" x 6")
6141A	Silver
6141BK	Black
6141BZ	Bronze

## LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only (“Customer”) for:

**Frame:** three (3) years

**Tips, Wheels/Casters, and Handgrips:** three (3) months


The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

*For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

Handgrip  
*Agarre De Mano*

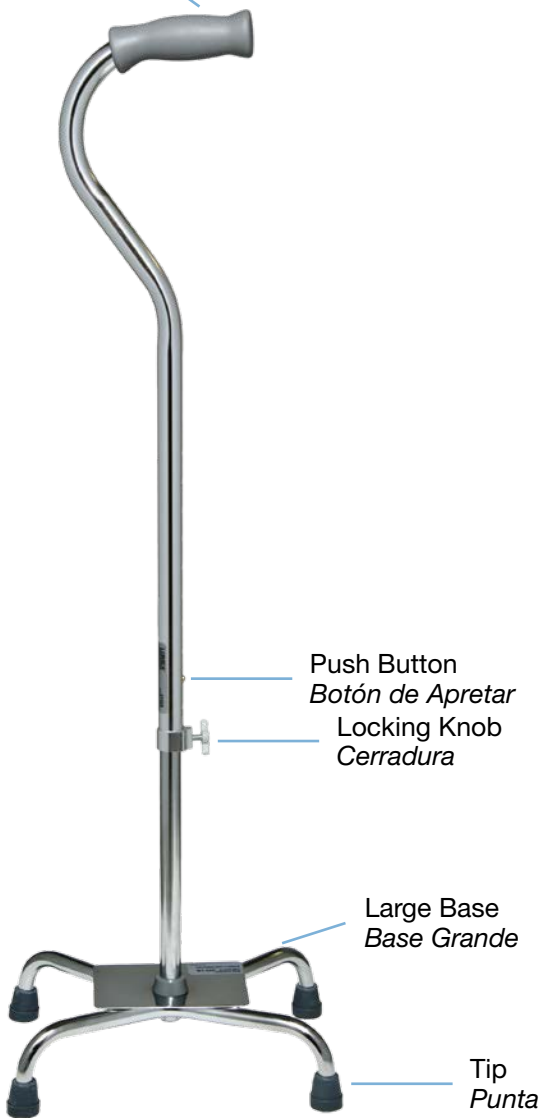

## DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Este producto no debe ser usado sin instrucciones apropiadas de su profesional de cuidado de salud.
2. Este producto tiene una capacidad de peso máximo de usuario de 300 lb. - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE. Estos bastones NO SON designados para soportar el peso total de individuales.
3. GF Health Products, Inc. no asume ningún responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
4. Si componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO debe usar partes substitutos.
5. Antes de usar, asegúrese de que la punta esté correctamente asentada y recta. Revise la punta de goma en busca de rasgaduras, roturas, grietas o desgaste. Si existe alguna de estas condiciones, reemplace la punta de goma de inmediato.
6. Siempre tenga cuidado al usar este producto en superficies mojadas o resbaladizas.
7. Examine el producto seminales para función normal y gasto. Si algún componente no esta funcionando correctamente y se ve desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparar y partes de reemplazo.
8. El único botón de ajuste de altura TIENE que sobresalir por el hueco de ajustamiento de altura en el bastón para asegurar que esta asegurado. SIEMPRE prueba para ver si la manga y la altura esta n onto esta cerrado correctamente ANTESde usar.
9. Asegúrese de que el collar de bloqueo esté bien apretado en todo momento
10. Cuando estés usando un bastón con base cuadrada, el bastón debe estar colocado en una superficie de caminar con las cuatro patas en contacto con la superficie. Uso del bastón de otra manera puede causar daño al bastón y/o herida persona.

## ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.

- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Se debe tener cuidado para asegurar que todos los ajustes de altura sean seguros.
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**  
[www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov)

## ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsabilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, asamblea o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en ua rutina de mantenimiento preventativo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplace apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente en la posicion abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es disenio para soportar todo el peso del usuario.



## MANTENIMIENTO

- Pásale con una toalla húmedo albastón seminal.
- Agarres pueden ser limpiados con jabón o detergente suave.
- NO USE solvente orgánicos como acetona, que puede dañar el agarre.
- Nunca debe usar limpiadores abrasivos o estropajos en cual quiera parte del bastón.
- Cheque la cerradura seminal para rigidez.
- Reemplace la punta si es necesario.
- Para garantizar el servicio mejor de su producto, siempre especifica partes de reemplazo de Lumex, disponible de su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com).

## INSTRUCCIONES PARA USO

Lea y Entienda Todas Las Instrucciones Antes de Uso.

Este bastón es diseñado para usuarios con alturas recomendados de 4' 10" a 6' 4". Por favor de consultar con un profesional de cuidado de salud para ajuste de altura y uso apropiado.

## AJUSTE DE ALTURA

1. Afloja la cerradura retorsando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Ajuste la altura del bastón. Apreté el botón y deslice la sección inferior arriba y abajo a la altura deseado.

**NOTE:** Un "clic" audible se oye cuando el botón se sobresale seguramente por el hueco de ajustamiento.

3. Asegura la cerradura retorsando en el sentido de las agujas del reloj hasta que este ajustado.

## ADJUSTING FOR RIGHT OR LEFT HANDED USE

1. Afloje la cerradura retorsando en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Apreté el botón para ajustar la altura y gira el mango del bastón 180° hasta que el botón se laquea en el hueco de ajustamiento.
3. Asegure la cerradura retorsando en el sentido de las agujas del reloj hasta que este aprieto. NO DEBE sobre apretar.

Número de artículo	Base grande (12" x 8")
6140A	Plata
6140BK	Negro
6140BZ	Bronce
Número de artículo	Base Pequeña (8" x 6")
6141A	Plata
6141BK	Negro
6141BZ	Bronce

## GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cual quiera es el "Cliente") solamente por:

**Marco:** tres (3) años

**Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y**

**asiento:** tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compro el producto dentro del periodo de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamand 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email [cs@grahamfield.com](mailto:cs@grahamfield.com). Direcciones específicas serán suministrado.

A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNOS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Esta garantía te provee derechos legales especificamentos. Usted podra tener otros derechos, que se variar por estado a estado o pais o pais.

*Por informacion adicional sobre reclamaciones de garantia, por favor de visitor los terminos y condicions de GF que se encuentran en la pagina [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)*

## Features

- Contoured handle provides a comfortable, secure handgrip
- Easy height adjustment from 29 1/4 - 38 1/4" in 1" increments with locking mechanism for added security
- Maximum weight capacity 300 lb - EVENLY DISTRIBUTED
- Designed for both left and right-handed use
- Meets the requirements for HCPCS E0105
- Lifetime Limited Warranty
- Latex free

## Características

- Agarre contorneado provee un agarre de mano confortable y seguro
- Ajustamiento de altura fácil de 29 1/4 - 38 1/4" en incrementos de 1" con mecanismo de cerradura para seguridad adicional
- Capacidad de Peso Máximo 300 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Diseando para uso de mano izquierda y derecha
- Conformo con los requisitos de HCPCS E0105
- Garantía Limitada de por Vida
- Sin látex



For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

Para la información más último sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)

© 2012, GF Health Products, Inc.,  
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.  
Made in China. [www.grahamfield.com](http://www.grahamfield.com)