

Transfer Bench


de Banco de Transferir

Items 7927KD-1 & 7927KD-2



SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.
- Users with limited physical capabilities should be supervised or assisted when using the transfer bench.
- Item has a maximum weight capacity of 350 lb. **EVENLY DISTRIBUTED.**
- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly, or use of this product.
- Leg extensions with rubber tips **MUST** be in contact with the floor at all times.
- Ensure that the push buttons fully protrude through the same height adjustment hole of each leg extension. This ensures that the leg extensions are securely locked in position and that an even height adjustment is achieved.
- Make certain **ALL** screws and nuts are tight at all times.
- Inspect rubber tips on the leg extensions for rips, tears, cracks or wear or if they are missing. Replace them **IMMEDIATELY** if any of these conditions exist.
- The transfer bench seat **MUST** be installed before sitting on the transfer bench.
- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

MAINTENANCE

- Use a mild soap and water solution, rinse with clear water, then dry with a soft cloth. Ensure that product is well rinsed before using.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the product.
- Check fit and tightness of all nuts, bolts and knobs weekly to ensure that product is safe to use.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

ATTACHING THE LEG EXTENSIONS (IF NOT ATTACHED ALREADY)

1. Place frame on its side on a level surface.
2. Attach leg extensions with suction feet to the frame on the same side as where the support arm will be. Attach leg extensions with flange tips to frame on opposite side of frame.
3. The transfer bench legs with suction feet should be the two legs that are to be placed inside the tub.

NOTE: Ensure seat support tubes buttons protrude fully through channel guide holes.

ATTACHING THE BACKREST

1. Determine the side on which the backrest should be mounted by knowing which direction the user will face when sitting on the bench in the tub.
2. Position the bench upright on a level surface.
3. Locate the channel guides (4 each) on underside of seat. Align backrest support tubes with channel guides.
4. Slide backrest seat support tubes through channel guides until seat support tube push buttons protrude fully through channel guide holes.

NOTE: Ensure seat support tubes buttons protrude fully through channel guide holes.

CAUTION: Backrest is not designed to support the full weight of the user.

CAUTION: Ensure backrest is facing down correctly before inserting to avoid improper installation.

ATTACHING THE SUPPORT ARM

1. To attach the support arm, position the seat arm against the leg frame and slide the armrest tubing into the tube openings until it clicks into place. Make sure that the push buttons fully protrude through the holes in the bracket.

NOTE: An audible “click” will be heard.

2. To remove the support arm, depress the push buttons and pull up.

NOTE: The end with the Support Arm and Suction Feet is the side that should be inside the tub.

ADJUSTING LEG HEIGHT

1. Depress the height adjustment button and slide the lower leg upward or downward until the height adjustment button clicks into place in the desired hole.
2. Repeat for other 3 legs.

CAUTION: Ensure that all four legs are adjusted to the same height, and that all height adjustment buttons protrude fully through adjustment holes before use.

USING YOUR TRANSFER BENCH

NOTE: Be sure to move slowly throughout use to prevent injuries.


NOTE: Children or those who need assistance should NOT be left unattended during use of this product.

From a seated position (such as a wheelchair):

1. Place your wheelchair next to the bench, facing the front of the bathtub.
2. Engage wheelchair locks.
3. Transfer your torso to the transfer bench first, and then lift your legs into the tub. Move slowly to prevent injuries.
4. After bathing, lift your legs out of the tub first, then your torso.

From a standing position:

1. Sit on the side of the transfer bench that is outside of the tub.
2. Extend your arms to grab the support arm of the bench and slide your body over onto the bench. Lift each leg over the tub slowly.
3. Position yourself to a comfortable position in center of bench.
4. After bathing, lift your legs out of the tub first, then your torso slowly.

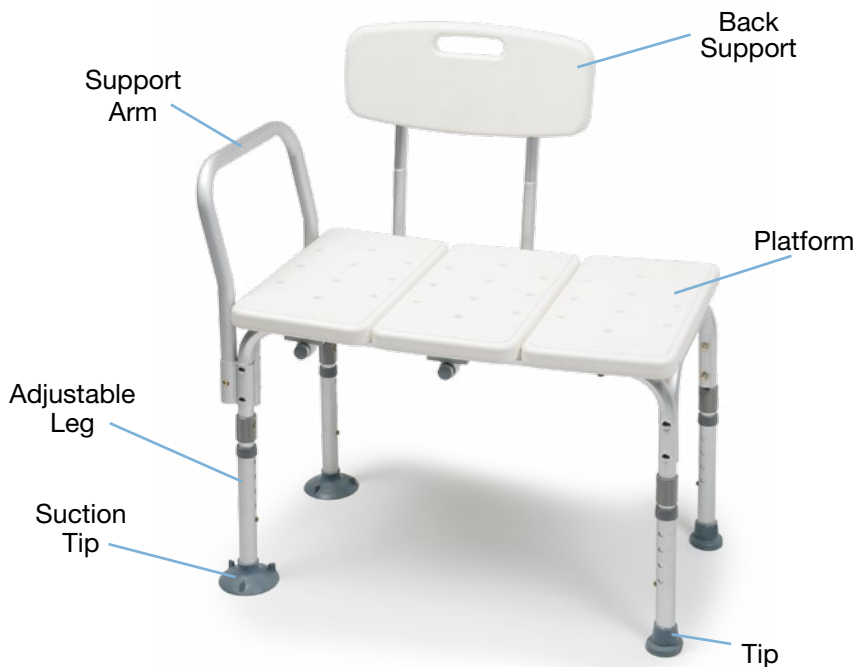

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only ("Customer") for:

Frame: five (5) years

Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF'S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF's terms and conditions located on www.grahamfield.com

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente por:

Marco: cinco (5) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y

asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado apropiadamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compró el producto dentro del período de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamando 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas serán suministradas.

A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESADAS O IMPLÍCITAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDAS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPECTOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNAS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTÍAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERÁN LIMITADAS A LA MEDIDA MÁXIMO PERMITIDA POR LA LEY. Esta garantía le provee derechos legales específicos. Usted podrá tener otros derechos, que se varían por estado a estado o país a país.

Por información adicional sobre reclamaciones de garantía, por favor de visitar los términos y condiciones de GF que se encuentran en la página www.grahamfield.com

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

- **NO DEBE UTILIZAR** este producto sin primero leer y entender estas instrucciones y cual quiere otro material como el manual de usuario, manual de servicio hoja de instrucción suministrado con este producto. Si no puedes entender las advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional de cuidado de salud, distribuidor o personal técnica antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.
- Usuarios con capacidades físicas puede ser supervisados o asistidos cuando utilizar el banco de transferir.
- Capacidad de peso máximo de 350 lb **DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE**.
- GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso impropio de este producto.
- Extensiones de patas con puntas de goma **TIENEN** que estar en contacto con el piso todo el tiempo.
- Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente por los mismos huecos de ajustamiento de altura de cada extensión de pata. Esto asegura que las extensiones de pata están asegurados en posición y que el ajustamiento de altura esta uniforme.
- Asegure que la ferretería, tornillos y perillos están apretados todo el tiempo.
- Examine las puntas de goma en las extensiones de patas para grietas o desgaste o si faltan. Reemplace **IMEDIAMENTE** si estas condiciones existen.
- El asiento del banco de transferir **TIENEN** que estar instalado antes de sentarse en el banco de transferir.
- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. inmediatamente.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

MANTENIMIENTO

- Utilice una solución de jabón suave y agua, enjuague con agua limpia y seca con una toalla suave. Asegure que el inodoro esta enjuagado bien antes de uso.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos en cual quiere parte de este inodoro.
- Cheque seminalmente que los tornillos y perillas están apretados para asegurar que el inodoro esta bueno para utilizar.
- Para garantizar el servicio mejor de su inodoro, siempre pide partes de reemplazo de Lumex si son disponible por so distribuidor de GF Health Products, Inc.

Para mas información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

SUJETANDO LAS EXTENSIONES DE PATA (SI NO VIENAN SUJETADOS)

1. Ponga el marco en su lado en un superficie nivel.
2. Sujeta las extensiones de pata con puntas de succión en el marco en el mismo lado donde se va sujetar el soporte de brazo. Sujeta las puntas de flange en el marco en el lado opuesto del marco.
3. Las patas del banco de transferir con las puntas de succión deben ser las dos patas que deben ir adentro de la tina.

NOTA: *Asegura que los botones de apretar en la extencion de pata sobresalen completamente por los huecos plasticos.*

SUJETANDO EL RESPALDO

1. Determina in que direccion el usuario va estar cuando este sentado en el banco en la tina.
2. Posicione el banco en un superficie nivel.
3. Localice las guías de canal (4) abajo del asiento. Alinea los tubos de soporte del respaldo con las guías de canal.
4. Deslice los tubos de soporte del respaldo dentro de las guías de canal hasta que los botones de apretar sobresalen completamente por los huecos de las guías de canal.

NOTA: *Asegure que los botones del tubo de soporte del respaldo sobresalen completamente por las huecos de las guías de canal.*

CAUCION: *El respaldo no es diseñado soportar todo el peso del usuario.*

CAUCION: *Asegure que el respaldo esta hacia abajo antes de insertar para evitar instalacion incorrecto.*

SUJETANDO EL BRAZO DE LADO

1. Para sujetar el brazo del asiento, posicione el brazo del asiento sobre la pata del marco y deslice los tubos por los huecos de los tubos. Asegure que los botones de apretar sobresalen completamente en la abradezera.

NOTA: *Se oye un "clic" cuando esta puesto.*

2. Para remover el brazo de lado, apreté los botones de apretar y jale hacia arriba.

NOTA: *El lado con el brazo de lado y Punta de Succion es el lado que debe estar en la tina.*

AJUSTANDO LA ALTURA DEL INODORO

1. Apriete el botón de ajustamiento de altura y deslice la parta inferior de la pata hacia arriba y abajo hasta que el botón de ajustamiento esta asegurado en el hueco deseado.
2. Repita para las otras 3 patas.

CAUTION: *Asegure que todas cuatros patas están ajustados a la misma altura y que todos los botones de ajustamiento sobresalen por los huecos de ajustamiento antes de uso.*

UTILIZANDO SU BANCO DE TRANSFERIR

NOTA: Asegure moverse despacio durante uso para prevenir heridas.


NOTA: Niños y los quienes necesitan asistencia NO deben estar desatendidos durante uso de este producto.

De la posición sentado (como una silla de ruedas):

1. Ponga su silla de rueda al lado al banco hacia la parte de frente de la tina.
2. Pisa las cerraduras de la silla de rueda.
3. Transfiere su torso al banco de transferir primero, y levante sus piernas en la tina. Mueve despacio para prevenir heridas.
4. Después de bañarse, levante sus piernas afuera de la tina primero y después su torso.

De la posición parado:

1. Siéntese en el lado del banco de transferir que esta fuera de la tina.
2. Extiende sus brazos para agarrar el brazo de lado del banco y deslice su cuerpo sobre el banco. Levante cada pierna despacio sobre la tina.
3. Posicione su miso en una posición confortable en el centro del banco.
4. Después de bañarse, levante sus piernas afuera de la tina primero y después su torso.

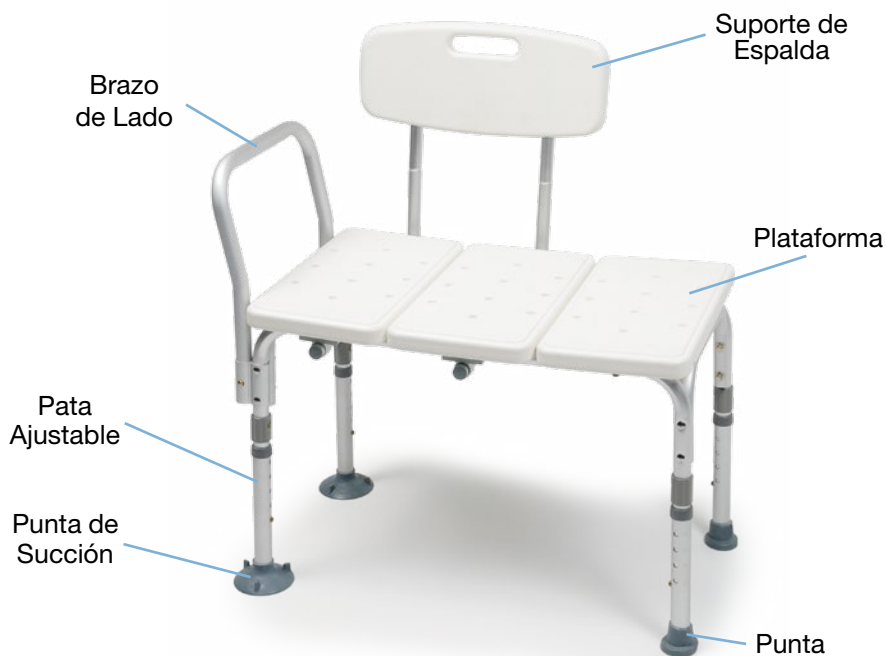

Features

- Provides assistance to those who have difficulty stepping over the bathtub walls
- Anodized aluminum frame is lightweight, durable, and rust resistant
- Drainage holes in seat minimizes water build up
- Reversible backrest to accommodate any bathroom
- Support Arm aids in lateral transfer
- Maximum weight capacity 350lbs EVENLY DISTRIBUTED
- Designed to meet the requirements of HCPCS code: E0247

Características

- Provee asistencia para quienes tienen dificultad pisar sobre las paredes de la bañera
- Marco de aluminio anodizado es ligero, durable y resistente a oxido
- Huecos de drenaje en el asiento reduce la acumulación de agua
- Respaldo es reversible para acomodar cual quiere baño.
- Capacidad de peso de 350 lb DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Diseñado a reunir los requisitos de código de HCPCS: E0247

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2014, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com