

Walkane

Andador Bastón

Item 6015A



SAFETY GUIDELINES - PLEASE READ BEFORE USE


1. Each individual should **ALWAYS** consult with their physician or other health care professional to determine proper adjustment and usage.
2. Before use, be sure that the Walkane is in its open and locked position.
3. All legs **MUST** be in contact with the floor at all times during use. This will ensure the Walkane is properly balanced.
4. This product has a maximum user weight limitation of 300 lbs - **EVENLY DISTRIBUTED. ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag.
5. Ensure handgrips **DO NOT** twist on Walkane – otherwise damage or injury may occur.
6. **ALWAYS** test to see that the Walkane and attachments are properly and securely locked in the open position **BEFORE** using.
7. After installation and before use, ensure that all attaching hardware is securely tightened.
8. **ALWAYS** use caution when using the Walkane on wet and slippery surfaces. **DO NOT** use the Walkane on stairs and steep inclines.
9. **DO NOT** store or transport Walkane in open position. Fold Walkane when not in use.
10. Before attempting to reach objects or pick them up from the floor by reaching down between your knees, place feet securely on the floor. Use **EXTREME** caution when reaching for any object.
11. GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
12. Inspect Walkane weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.

GENERAL WARNING

- **DO NOT** use this product without first completely reading and understanding these instructions and any additional instructional material such as owner's manuals, service manuals or instruction sheets supplied with this product. If you are unable to understand the warnings, cautions or instructions, contact a healthcare professional, dealer or technical personnel before attempting to use this equipment - otherwise, injury or damage may occur.

GENERAL WARNING (CONT.)

- If components are damaged or missing, contact your GF Health Products, Inc. distributor immediately. **DO NOT** substitute parts.
- Before use, ensure that all assembled parts are secure and all hardware is tightened.
- Care should be taken to ensure that all height adjustments are secure, and that wheels (if applicable) and moving objects are in good working order before using this walker.
- **ALWAYS** observe the user weight limitation on the hangtag of this product.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm-
www.p65warnings.ca.gov.

INSTALLATION WARNINGS

- GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- Inspect product weekly or on a set routine preventative maintenance schedule for normal wear and tear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your Lumex dealer for repair and/or appropriate replacement parts.
- **ALWAYS** test to see that the product is properly secured in open position **BEFORE** use and ensure all hardware is securely tightened.

STABILITY WARNINGS

Be careful when reaching for objects when using the Walkane. Reaching for objects can change the weight distribution of the walker and may cause the Walkane to tip, resulting in injury or damage.

MAINTENANCE

- For dust and dirt, wipe walker gently with damp, soft cloth.
- Inspect periodically for wear or damage. Use a mild soap and water solution to clean, rinse with clear water, then dry with a soft cloth.
- Never use organic solvents, abrasive cleaners, or scouring pads on any part of the walker.
- Inspect Walkane weekly for proper function and wear. If any component is not in proper working order or appears worn, contact your GF Health Products, Inc. distributor for repair and/or appropriate replacement parts.
- If handgrips are loose, **DO NOT** use. Contact your GF Health Products, Inc. authorized distributor.
- Replace any broken, damaged or worn items immediately.
- To guarantee the best service from your product, always specify Lumex replacement parts, available from your GF Health Products, Inc. authorized distributor.

For more information regarding GF Health Products, Inc. products, parts and services, please contact your distributor or visit us online at www.grahamfield.com.

INSTRUCTIONS FOR USE

Please Read all Instructions Before Use.

This product is designed for use by those who require a wider base of support than that offered by most canes.

Please consult a healthcare professional for the proper height adjustment.

ADJUSTING THE HEIGHT

NOTE: The Walkane is packaged in its lowest height position. It should be adjusted to the desired height before operation. Consult with a healthcare professional for proper adjustment.


1. To adjust the height of the leg attachment, depress the adjustment button and slide upwards or downwards to the desired height.
2. Adjust the height of the walker by aligning all four leg attachments to the same position height.
3. Position the Walkane so that the closed end of the cross brace is facing away from you.

OPENING THE WALKANE

1. To unfold Walkane, press down on crossbrace until it reaches the crossbrace stop.

CLOSING THE WALKANE

1. Pull up on crossbrace.

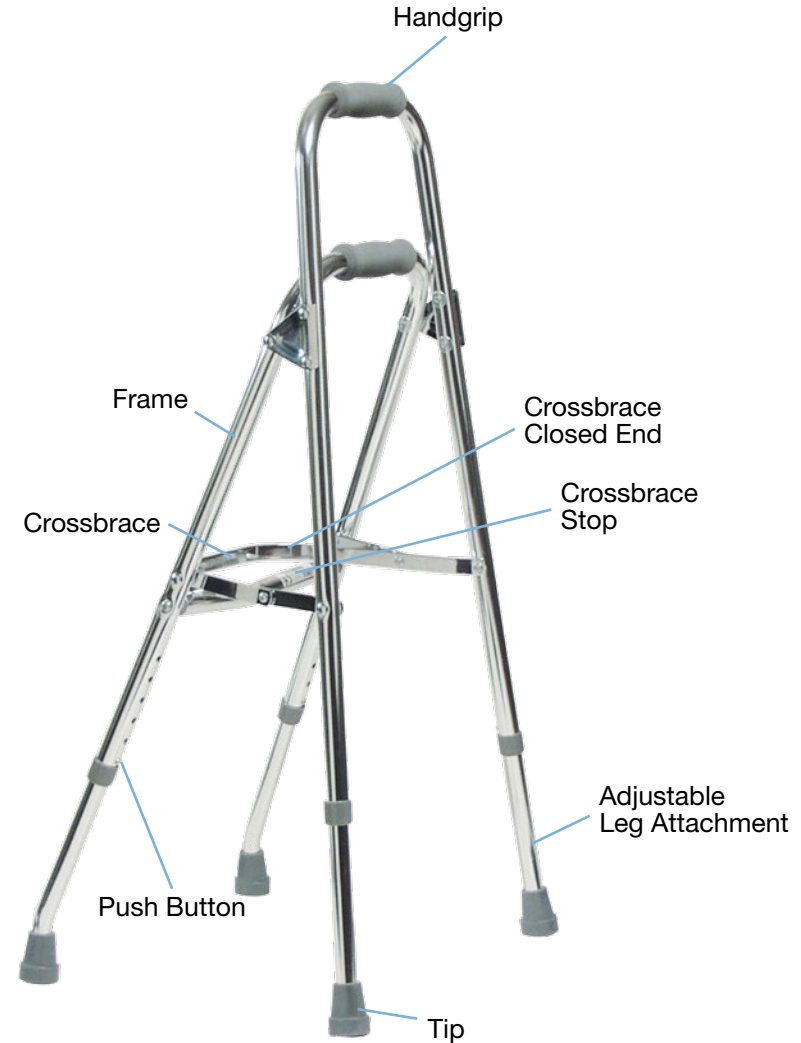

LIMITED WARRANTY

GF Health Products, Inc. (“GF”) warrants this product to be free from defects in materials and workmanship to the original retail purchaser or original lessee only (“Customer”) for:

Frame: five (5) years

Tips, Wheels/Casters, and Handgrips: three (3) months

The warranty does not cover: 1) other non-durable components; 2) defects, damage or other conditions caused by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner; and 3) products not installed, used, or properly cleaned and maintained in accordance with the applicable GF instructions. Product provided to a lessee must be inspected prior to delivery and must be maintained by the Dealer. The lessee must be properly trained on the operation and safety of this product prior to use.

GF will, at its option, repair or replace the defective product. Warranty issues must: 1) be reported to the Dealer from whom the Customer purchased the product within the applicable warranty period and 2) upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. GF is not responsible for freight or labor charges associated with the warranted item. If there is no Dealer, you must contact GF directly by calling 770-368-4700, faxing 770-368-4932 or e-mailing cs@grahamfield.com. Specific directions will be provided.

TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS WARRANTY IS GF’S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. EXCEPT IN CASES WHERE IMPLIED WARRANTIES MAY NOT BE VALIDLY WAIVED, GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. GF’S TOTAL LIABILITY FOR THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE COST OF THE PRODUCT(S) GIVING RISE TO THE CLAIM. IN NO EVENT WILL GF BE LIABLE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. CERTAIN LAWS MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES FOR SPECIFIC PRODUCTS AND IN THOSE INSTANCES GF’S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF’S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights, which vary from state to state or country to country.

For additional information related to warranty claims, please visit GF’s terms and conditions located on www.grahamfield.com

GARANTIA LIMITADA

GF Health Products, Inc. (“GF”) garantiza este producto de ser libre de defectos en material o calidad utilizado al comprador original o arrendatario (cual quiera es el “Cliente”) solamente por:

Marco: cinco (5) años

Ruedas, empuñaduras, frenos de mano, almohadillas de antebrazo, y asiento: tres (3) meses

La garantía no cubre: 1) otros componentes no durables; 2) defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna; 3) productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual de GF. Productos provistos a un arrendatario deben ser inspeccionados antes de entrega y deben ser mantenidos por el Distribuidor. El arrendatario o Cliente debe ser entrenado propiamente en la operación y seguridad de este producto antes de uso.

GF va a decidir, a su opción, reparar o reemplazar un producto defectivo. Cuestiones de garantía deben: 1) ser reportados al Distribuidor de donde el consumidor compro el producto dentro del periodo de garantía aplicable y 2) en examinación por GF o su representante autorizado, dar prueba del producto de garantía. GF no es responsable por flete o cargos de labor asociados con el producto bajo la garantía. Si no hay un Distribuidor, puede contactar a GF directamente llamand 770-368-4700, por fax 770-368-4932 o por email cs@grahamfield.com. Direcciones específicas serán suministrado.

A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑO A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTICA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES. ALGUNOS LEYES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY. Esta garantía te provee derechos legales especificamentos. Usted podra tener otros derechos, que se variar por estado a estado o pais o país.

Por informacion adicional sobre reclamaciones de garantia, por favor de visitor los terminos y condiciones de GF que se encuentran en la pagina www.grahamfield.com

DIRECTRIZ DE SEGURIDAD – POR FAVOR DE LEER ANTES DE USO

1. Cada individual SIEMPRE debe consultar con su doctor o otro profesional de cuidado de salud para determinar ajustamiento y uso apropiado.
2. Antes de uso, asegure que el Walkane esta en su posición abierto y asegurado.
3. Todas las patas TIENEN que estar en contacto con el piso todo el tiempo cuando en uso. Esto puede asegurar que el Walkane esta balanceado apropiadamente.
4. Este producto tiene una limitación de peso máximo de usuario de 300 lb- DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE. SIEMPRE tiene que observar la limitación de peso en el “hang tag”.
5. Asegure que los mangos NO SE dan vuelta en el Walkane – o si no, daño o herida puede ocurrir.
6. SIEMPRE prueba que el Walkane y accesorios están puestos seguramente en la posición abiertos ANTES de uso.
7. Después de instalación y antes de uso, asegura que el ferretero esta seguramente apretados.
8. SIEMPRE use caución cuando usando el Walkane en superficies mojados y resbalosos. NO UTILICE el Walkane en escaleras o inclinadas.
9. NO DEBE guardar o transportar el Walkane en la posición abierta. Dobla el Walkane cuando no en uso.
10. Antes de intentar alcanzar objetos o recogerlos del piso alcanzando dentro sus rodillas, asegura sus pies en el piso. Usa caución EXTREMO cuando alcanzando por cual quiere objeto.
11. GF Health Products, Inc. no asume ninguna responsabilidad por cual quiere daño o herida causado por instalación, ensamblaje o uso incorrecto de este producto.
12. Examine su andador seminal para función normal y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando y se ve con desgaste, llame a su distribuidor de Lumex para reparación o reemplace de partes.

ADVERTENCIAS

- **NO DEBE** usar este producto sin leer y entender completamente estas instrucciones y material adicional que viene con este producto. Si no puedes entender los advertencias, cauciones o instrucciones, llame a su profesional, distribuidor o personal técnicos antes de tratar de usar este equipo – o si no, herida o daño puede ocurrir.

- Si los componentes están dañados o si faltan, llame a su distribuidor inmediatamente. NO substituye partes.
- Antes de uso, asegure que las partes instalados están seguros y todo el ferretería esta apretado.
- Cuido debe estar hecho para asegurar que todos los ajustamientos de altura están seguros, y que las ruedas (si aplicable) y objetos que se mueven están en buenas condiciones antes de usar el andador.
- SIEMPRE observa la limitación de peso del usuario en el "hangtag" de este producto.
- Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos cuando usando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso en el andador y puede causar que el andador se dobla, resultando en herida o daño.

 **ADVERTENCIA: CANCER Y DANO REPRODUCTIVO**
www.p65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIAS DE INSTALACION

- GF Health Products Inc. no asume responsabilidad por dano o herida hecho por instalacion inapropiado, asamblea o uso de este producto.
- Examina el producto semanalmente o en una rutina de mantenimiento preventivo para uso normal. Si algun componente no esta trabajando correctamente o se aparece usado, llame a su distribuidor de Lumex para reparacion y/o partes de reemplazo apropiado.
- SIEMPRE trata de ver que el producto esta asegurado correctamente en la posición abierto ANTES de uso y asegure que los tornios/hardware estan ajustados seguramente. El soporte de espalda debe SIEMPRE estar puesto y NO es diseño para soportar todo el peso del usuario.

ADVERTENCIAS DE ESTABILIDAD

Tenga cuidado cuando alcanzando por objetos mientras utilizando el andador. Alcanzando por objetos puede cambiar la distribución de peso del andador y puede causar que se de vuelta el andador, resultando en herida o dano.



INSTRUCCIONES PARA USO

Please Read all Instructions Before Use.

Este producto es diseñado para uso por los quienes requieren un base de soporte mas ancho de lo que ofrece por la mayoría de bastones.

Por favor de consultar con un profesional de cuidado de salud para ajustamiento apropiado.

AJUSTANDO LA ALTURA

NOTA: El walkane esta empaquetado en su posición mas baja. Debe ser ajustado a la altura deseado antes de operación.

1. Para ajustar la altura de las patas, apreté el botón de ajustamiento y deslice hacia arriba y abajo a la altura deseado.
2. Ajusta la altura del walkane en alineando todas cuatro patas a la misma posición de altura.
3. Posicione el Walkane para que la parte cerrada de la barra esta aparte de su mismo.

ABRIENDO EL WALKANE

1. Para desdoblar el Walkane, apreté hacia abajo en la barra hasta que se parre en la parada de la barra.

CERRANDO EL WALKANE

1. Jale hacia arriba en la barra.

MANTENIMIENTO

- Para polvo, limpie el andador con una toalla suave y mojada.
- Examine por daño y desgaste periódicamente. Utilice un jabón suave y agua para limpiar, lave con agua limpia y seca con una toalla suave.
- Nunca utilice solventes orgánicos, limpiadores abrasivos o estropajos en cualquier parte del andador.
- Examine su Walkane seminal para función y desgaste. Si algunos componentes no están funcionando correctamente o se ven con desgaste, llame a su distribuidor de GF Health Products, Inc. para reparación y partes de reemplazo.
- Si los mangos están sueltos, **NO LOS** use. Llame a su distribuidor autorizado de GF Health Products, Inc.
- Para el mejor servicio de su andador, siempre use partes de reemplazo de GF Health Products, Inc.

Para más información sobre su producto, partes o servicio de GF Health Products, Inc, por favor de llamar a su distribuidor o visítenos online en www.grahamfield.com.

Features

- Ideal for users who do not require a walker but need a wider base for support and for those limited to one hand or arm use
- Lighter than a walker; more stable than a cane
- Contoured, comfortable handgrips
- Folds easily with one hand
- Maximum Weight Capacity 300 lb - EVENLY DISTRIBUTED
- Adjustable in height from 29" - 34"

Características

- Ideal para usuarios quienes no requieren un andador pero necesitan un base mas ancho para soporte y para los quienes son limitados a uso de un brazo o mano
- Mas ligero que un andador; mas estable que un bastón
- Mangas confortables y contorneados
- Se dobla fácilmente con una mano
- Capacidad de Peso Máximo 300 lb - DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE
- Ajustable en altura de 29" - 34"

For the most updated and current information on packaging, warranties, products and specifications, please visit our website at www.grahamfield.com

Para la información más ultimo sobre embalaje, garantías, productos y especificaciones, por favor de visitar a nuestro sitio de internet a www.grahamfield.com

© 2006, GF Health Products, Inc.,
One Graham-Field Way, Atlanta, Georgia 30340.
Made in China. www.grahamfield.com