

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

Tools required: Phillips screwdriver

- ⚠ **WARNING: Important! Read and understand these instructions before assembling or using the Everest & Jennings ("E&J") Adjustable Back Upholstery with Cushion. If you do not understand any part of these warnings or instructions, contact a healthcare professional for direction in the use of this product. If the Upholstery is not properly assembled, personal injury and damage to the upholstery could result.**
- ⚠ **WARNING: If components are damaged or missing, contact your E&J distributor immediately. DO NOT use substitute parts. Use only E&J replacement parts. Non-E&J replacement parts could cause personal injury and damage to the upholstery.**
- ⚠ **WARNING: DO NOT exceed the wheelchair's maximum weight capacity.**
- ⚠ **WARNING: GF Health Products, Inc. assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.**

INTENDED USE

The Adjustable Back Upholstery with Cushion is intended to provide a stable surface for propulsion and completion of wheelchair user's daily living activities.

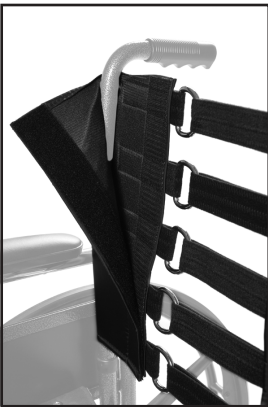


Fig. 1

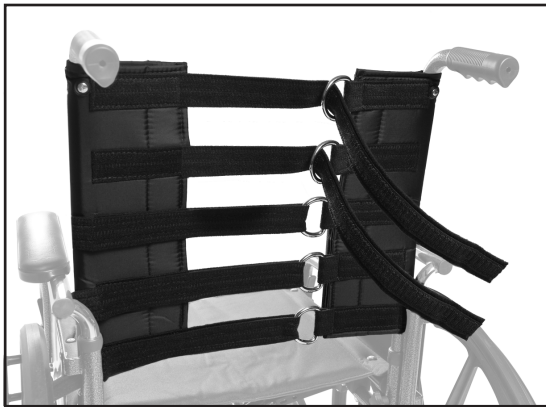


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

ASSEMBLY (REFER TO PICTURES ABOVE)

1. Use Phillips screwdriver to remove existing wheelchair back upholstery; keep hardware and upholstery for future use.
2. Place Back Upholstery around backposts as shown in Fig. 1.
3. Using existing hardware, install screw through grommet at top of Upholstery into backpost as shown in Fig. 2. Use Phillips screwdriver to tighten securely. Do this for both backposts.
4. Place cushion over Upholstery as shown in Fig. 3, and use hook and loop strips to fasten. Wheelchair with Back Upholstery and Cushion installed is shown in Fig. 4.
5. Straps can be tightened or loosened as shown in Fig. 2 depending on user preference.

- ⚠ **WARNING: Straps must be securely fastened. Failure to do so could affect back support and result in personal injury.**

MAINTENANCE AND CLEANING

Clean Upholstery and Cushion when necessary with a mild soap and water solution. Inspect Upholstery at least once a month for rips, tears and worn spots; ensure that all Upholstery attaching screws are present, properly aligned, and well-secured. Use a Phillips screwdriver to tighten Upholstery mounting screws. Check attaching screws for sharp edges or stripped screws, and replace if found.

- ⚠ **WARNING: Worn or torn Upholstery, or Upholstery with loose hardware, must be replaced immediately. It may not support body weight.**

LIMITED WARRANTY

SCOPE OF WARRANTY

GF Health Products, Inc. ("GF") warrants to the original purchaser only that it will replace or repair components, at GF's sole discretion, that are defective in material or workmanship under normal use and service. All warranties are conditioned upon the proper use of the products strictly in accordance with good commercial practice and applicable GF instructions and manuals, including proper use and maintenance. To the extent that a third party warrants a component, GF conveys all of its rights under that warranty to the original purchaser, to the extent permitted.

This limited warranty shall only apply to defects that are reported in accordance with the provisions set forth in this warranty document, within the applicable warranty period and which, upon examination by GF or its authorized representative, prove to be a warranty item. (See Obtaining Warranty Service below) This limited warranty is not transferable.

The warranted components and time periods are set forth below:

Original and Replacement Upholstered Tops †: 1 year

* Labor is not included in the warranty.

† Upholstery is only warranted on material supplied by GF.

‡ The warranty period is as designated above. If a part is replaced under warranty, the original warranty period will not be affected. All other replacement parts will be subject to the warranty period specified.

The applicable warranty period shall commence from date of shipment to the original customer, unless there is an expiration date on the component in which case the warranty shall expire on the earlier of warranty period or the expiration date.

OBTAINING WARRANTY SERVICE

Customers located in the United States who wish to report a warranty issue, must contact GF directly by calling 1.770.368.4700 or by e-mailing a request to cs@grahamfield.com. Customers located outside the United States must contact the Distributor from whom they purchased the products. In both cases, further directions will be provided once the initial contact is made. This limited warranty shall only apply to defects that are reported within the applicable warranty period. Failure to abide by the specific directions will result in denial of the warranty claim.

The warranty does not cover and GF shall not be liable for the following:

- 1) Defects, damage, or other conditions caused, in whole or in part, by misuse, abuse, negligence, alteration, accident, freight damage, tampering or failure to seek and obtain repair or replacement in a timely manner;
- 2) Products which are not installed, used, or properly cleaned and maintained as required in the official manual for the applicable product;
- 3) Products considered to be of a non-durable nature including, but not limited to: filters, fuses, gaskets, lubricants, and charts;
- 4) Accessories or parts not provided by GF;
- 5) Matching of color, grain or texture except to commercially acceptable standards;
- 6) Changes in color caused by natural or artificial light;
- 7) Charges by anyone for adjustments, repairs, replacement parts, installation or other work performed upon or in connection with such products which are not expressly authorized in writing, in advance, by GF;
- 8) Any labor or shipping charges incurred in the replacement part installation or repair;
- 9) Costs and expenses of regular maintenance and cleaning; and
- 10) Representations and warranties made by any person or entity other than GF.

ENTIRE WARRANTY, EXCLUSIVE REMEDY AND CONSEQUENTIAL DAMAGES DISCLAIMER

THIS WARRANTY IS GF'S ONLY WARRANTY AND IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. GF MAKES NO IMPLIED WARRANTIES OF ANY KIND INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IF ANY MODEL OR SAMPLE WAS SHOWN TO THE CUSTOMER, SUCH MODEL OR SAMPLE WAS USED MERELY TO ILLUSTRATE THE GENERAL TYPE AND QUALITY OF THE PRODUCT AND NOT TO REPRESENT THAT THE PRODUCT WOULD NECESSARILY CONFORM TO THE MODEL OR SAMPLE IN ALL RESPECTS. THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PARTS. GF SHALL NOT BE LIABLE FOR AND HEREBY DISCLAIMS ANY DIRECT, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO: DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR INCOME, LOSS OF USE, DOWNTIME, COVER, OR EMPLOYEE OR INDEPENDENT CONTRACTOR WAGES, PAYMENTS AND BENEFITS. CERTAIN STATES MAY CONFER ADDITIONAL RIGHTS REGARDING WARRANTIES AND IN THOSE STATES GF'S LIABILITY AND THE LIABILITY OF GF'S SUPPLIERS, SHALL BE LIMITED TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW.

The warranties contained herein, together with GF's current Terms and Conditions, contain all the representations and warranties with respect to the subject matter of this document, and supersede all prior negotiations, agreements and understandings with respect thereto. The recipient of this document hereby acknowledges and represents that it has not relied on any representation, assertion, guarantee, warranty, collateral contract or other assurance, except those set out in this document.

For additional information on this product or this warranty, please contact a GF Customer Service Representative.

NOTES:

- 1) Additional terms and conditions may apply. See GF's General Terms and Conditions on its website: www.grahamfield.com.
- 2) Freight claims must be notated on the appropriate shipping documents and must be made with immediacy. International, federal and state regulations govern specific requirements for freight claims. Failure to abide by those regulations may result in a denial of the freight claim. GF will assist you in filing the freight claim.
- 3) Claims for any short shipment must be made within three (3) days of the invoice date.



Manufactured For:

GF Health Products, Inc.
1 Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340
Made in U.S.A.

© 2013, GF Health Products, Inc. All Rights Reserved.
Everest & Jennings is a registered trademark of
GF Health Products, Inc.

EJ_2055LS-INS-LAB-RevC25



+1 770.368.4700

Information contained herein is subject to change without notice.
The most current and complete product information can be found on our website.
www.grahamfield.com





GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA USO FUTURO

Herramientas necesarias: Phillips destornillador

- ⚠ **ADVERTENCIA:** ¡Importante! Lea y entienda estas instrucciones antes de ensamblar o utilizar el Tapizado Ajustable de Espalda con Cojín de Everest & Jennings ("E&J"). Si no entiende cual quiere parte de estas advertencias o instrucciones, llame a profesional de cuidado de salud para dirección en como utilizar este producto. Si el Tapizado no está ensamblado en la manera correcta, herida personal o daños a la propiedad puede ocurrir.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Si componentes están dañados o no están presentes, contacte a su distribuidor autorizado de productos E&J inmediatamente. No substituya piezas. Utilice solamente partes de reemplazo de E&J. Partes de reemplazo de no-E&J pueden causar herida personal o daños a la propiedad.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** NO exceda la capacidad máxima de peso de la silla de ruedas.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** GF Health Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o heridas causadas por ensamblaje incorrecto de este producto.

USO PREVISTO

El Tapizado de Espalda Ajustable con Cojín está diseñado para proporcionar una superficie estable para la propulsión y la realización de actividades de la vida diaria del usuario de la silla de ruedas.

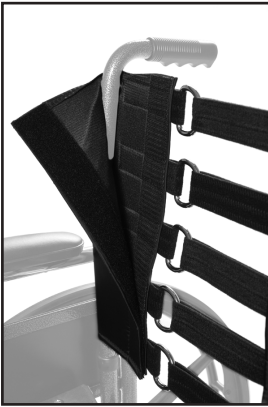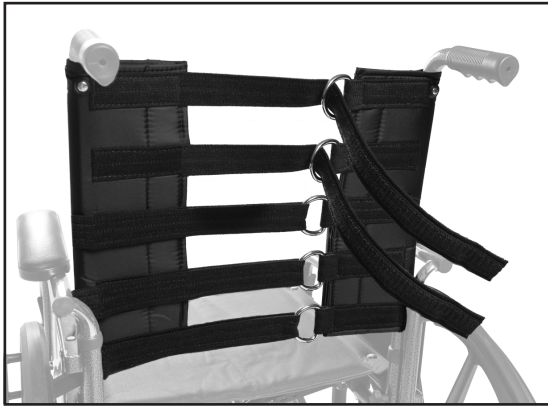**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3****Fig. 4****ENSAMBLAJE (VÉASE LAS FOTOS ARRIBA)**

1. Utilice un destornillador Phillips para quitar el tapizado existente de espalda de la silla de ruedas; mantenga ferretería y tapizado para uso futuro.
 2. Coloque el Tapizado alrededor los palos de espalda como se muestra en la figura 1.
 3. Utilizando la ferretería existente, coloque el tornillo a través de la arandela en la parte superior del Tapizado en el palo como se muestra en la figura 2. Utilice un destornillador Phillips para apretar firmemente. Haga esto para ambas palos de espalda.
 4. Coloque el Cojín sobre el Tapizado como se muestra en la figura 3, y utilice las correas de velcro para sujetar. La silla de ruedas con Tapizado de Espalda y Cojín instalado se muestra en la figura 4.
 5. Las correas se pueden apretar o aflojar, como se muestra en la figura 2, dependiendo de la preferencia del usuario.
- ⚠ **ADVERTENCIA:** Las correas deben estar bien sujetos. De lo contrario, podría afectar apoyo para la espalda y causar herida personal.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie el Tapizado y el Cojín si es necesario con un jabón suave y agua. Inspeccione el Tapizado al menos una vez al mes por rasgaduras, roturas y manchas desgastados, y asegurar que todos los tornillos que sujetan el Tapizado están presentes, debidamente alineados y bien asegurada. Utilice un destornillador Phillips para apretar los tornillos de montaje del Tapizado. Compruebe tornillos de fijación de los bordes afilados o tornillos pelados y reemplace si lo encuentra.

- ⚠ **ADVERTENCIA:** El Tapizado desgastada o rota, o el Tapizado con piezas sueltas, debe ser sustituido inmediatamente. No puede apoyar el peso corporal.

GARANTÍA LIMITADA

GF Health Products, Inc. ("GF") garantiza al comprador original o arrendatario (cualquiera es el "Cliente") solamente, que va reemplazar o reparar componentes, a la decisión solo de GF, cuales son defectos en material o calidad utilizado normalmente y con servicio. Todas garantías son condicionales por el uso apropiado de los productos en acuerdo con prácticas de buen negocio y aplicable con los instrucciones y manuales de GF, incluyendo uso apropiado. A la medida que un tercer parte garantiza un componente, GF transmite todos nuestros derechos debajo esa garantía al Comprador Original, a la medida permitido. El comprador original es el quien compra este product nuevo y no usado por GF o un Distribuidor Certificado.

Esta garantía limitada solamente se aplica por los defectos reportados en conformidad con los proviciones estabalizadas en este garantía documento, dentro del period de garantía aplicable y cual con examinación por GF o su representante autorizado, da prueba del producto en garantía. (lea Obteniendo Servicio de Garantía abajo). Esta garantía limitada no es transferible.

Los componentes garantizados y los periodos se establecen abajo:

- Tapizado Ajustable de Espalda con Cojín: 1 (uno) año
 - * La mano de obra no es incluido en la garantía.
 - † Tapicería solamente es garantizado en material suministrado por GF.
 - ‡ El period de la garantía esta designado arriba. Si una parte se reemplaza durante la garantía, el periodo de garantía original so seria afectado.
- Todas otras partes de reemplazo son sujetos a el periodo de garantía especificado.

El periodo de garantía se comienza en la fecha de transporte al Cliente a menos que haya una fecha de expiración en el componente en cual la garantía se expira en la periodo de garantía o la fecha de expiración.

OBTENIENDO SERVICIO DE GARANTÍA

Comunicase con el Distribuidor de donde compraste el producto. . Si no hay Distribuidor, debes llamar a GF directamente llamando 770-368-4700 o por email a cs@grahamfield.com. Direcciones especificos se van a dar por el Representante de Servicio De Clientes. Falla de seguir las direcciones especificos se resultara en negación de su reclamación de garantía.

La garantía no cubre y GF no será responsable de lo siguiente:

- 1) Defectos, daños u otras condiciones causadas, en su totalidad o en parte, por el mal uso, abuso, negligencia, alteración, accidentes, daños durante el transporte, manipulación indebida o dejar de solicitar y obtener la reparación o el reemplazo de una manera oportuna;
- 2) Productos que no se instalen, utilicen, limpien y mantengan de manera apropiada, como se requiere en el manual oficial aplicable para el producto;
- 3) Productos que se consideran que no son de naturaleza duradera, incluyendo, pero sin limitarse a: puntas, filtros, fusibles, juntas, lubricantes, y gráficos;
- 4) Accesorios o piezas no suministradas por GF;
- 5) Pareo de color, grano o textura except a los aceptables por los normas
- 6) Cambios en color causado or luz natural o artificial
- 7) Cargos por concepto de ajustes, reparaciones, piezas de recambio, instalación u otro trabajo realizado en o relacionados con tales productos que no estén autorizados expresamente por escrito, de antemano, por GF;
- 8) Cualquier gasto de mano de obra o de envío que se incurra en la instalación de la pieza de reemplazo o la reparación;
- 9) Costos y gastos del mantenimiento y limpieza regular; y
- 10) Representaciones y garantías hechas por cualquier persona o entidad que no sea GF.

GARANTÍA ENTERO, REMEDIO EXCLUSIVO Y DESCARGO DE DAÑOS CONSIGUIENTE

ESTA GARANTÍA ES LA UNICA GARANTÍA DE GF Y ES EN VEZ DE TODAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESIDAS O IMPLICITADAS. GF NO HACE GARANTÍAS ENTENDIDOS DE CUALQUIERA MANERA INCLUYENDO GARANTÍAS ENTENDIDOS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PREPÓSITO PARTICULAR. SI UN MODELO Y MUESTRA SE LE ENSEÑA A UN CLIENTE, TAL MODELO O MUESTRA FUE UTILIZADO SOLAMENTE PARA ILUSTRAR EL TIPO GENERAL Y CALIDAD DEL PRODUCTO Y NO PARA REPRESENTAR QUE EL PRODUCTO SE CONFORME CON ESE MODELO Y MUESTRA EN TODOS RESPETOS. TODA RESPONSABILIDAD DE GF POR CUALQUIER PRODUCTO Y SERVICIO PROVEÍDO ES LIMITADA AL COSTO DEL PRODUCTO EN LA RECLAMACIÓN. EN NO EVENTO EN CONTRATO, INDEMNIZACIÓN, GARANTÍA, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRUCTA O OTRO QUE GF SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, ESPECIAL, INDIRECTO, INCIDENTAL, EJEMPLAR O CONSIGUIENTES INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A: DAÑOS PARA PERDIDA DE BENEFICIO O GANANCIA, PERDIDA DE USO, INACTIVO, O SALARIOS DE EMPLEADOS O TRABAJADORES CONTRACTORES, PAGOS O BENEFICIOS. ALGUNOS ESTADOS Y PAISES PUEDEN CONFERIR DERECHOS ADICIONALES SOBRE GARANTIAS Y EN ESOS INSTANTES LA RESPONSABILIDAD DE GF Y LA RESPONSABILIDAD DE LOS PROVEEDORES DE GF SERAN LIMITADO A LA MEDIDA MAXIMO PERMITIDO POR LA LEY.

Las garantías contenidos, juntos con los Terminos y Condiciones de GF, contienen todo la representaciones y garantías con respecto a sujeto de este document, y reemplaza cual quier negaciones, contratos de antes. El beneficiario de este document reconoce y represente que no haya fijado en otro representación, afirmación, garantía, collateral o contrato solamente en los de este document.

Por información adicional en este producto o garantía, por favor de comunicarse con un Representante de Servicio de Consumidor de GF.

NOTAS:

- 1) Se pueden aplicar términos y condiciones adicionales. Lea los Terminos y Condiciones de GF en la pagina de web www.grahamfield.com
- 2) Las reclamaciones de flete se deben anotar en los documentos de embarque apropiados y deben hacerse con immediatez. Los requisitos especificos para las reclamaciones de fletes se rigen por regulaciones internacionales, federales y estatales. El incumplimiento de estas regulaciones podría resul tar en la denegación de la reclamación de flete. GF le ayudará en la presentación de la reclamación de flete.
- 3) Las reclamaciones de embarques con faltantes se deben realizar en un plazo de tres (3) días de la fecha de la factura.



Fabricado para
GF Health Products, Inc.
1 Graham-Field Way, Atlanta, GA 30340
Fabricado en U.S.A.

© 2013, GF Health Products, Inc. Todos los derechos reservados. Graham-Field y Everest & Jennings son marcas de GF Health Products, Inc.
EJ_2055LS-INS-LAB-RevC25



+1 770.368.4700

Inf La información contenida en este documento está sujeta a cambios.
La información más actualizada y completa del producto se puede encontrar en nuestra página web.
www.grahamfield.com

